


PICO[°] 7 til dybe sår (2-7cm)¹

smith-nephew.com/pico

 **smith&nephew**

PICO[°] 7

Single Use Negative Pressure
Wound Therapy System

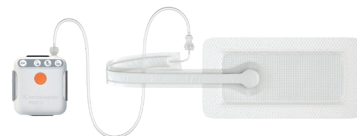


Supporting healthcare professionals

PICO 7 bandagen har bevist in vitro, at den er i stand til at håndtere let til moderat væskende sår samt levere -80mmHg nominel negativ trykterapi til store sår med en dybde på op til 4,5 cm, når den anvendes sammen med et passende NPWT sårfyldningsmateriale.¹

PICO kan anvendes med eller uden sårfyldningsmateriale


Såret bør nøje inspiceres for at vurdere, om der er behov for at anvende sårfyldningsmateriale eller om PICO bandagen kan appliceres direkte på såret uden fyld.

Hvis såret er under 2 cm dybt, kan PICO bandagen appliceres direkte på såret uden brug af sårfyldningsmateriale. Til sår med en dybde på over 0,5 cm vil det ofte være nødvendigt med et sårfyldningsmateriale for at sikre tilstrækkelig behandling af hele såroverfladen.

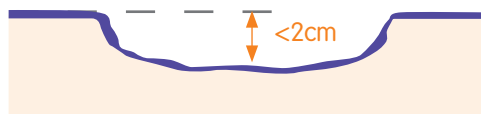

Sårtyper, der er under 2 cm dybe, hvor anvendelse af sårfyldningsmateriale bør overvejes


- Sårbunden er uregelmæssig
- Såret er undermineret
- Såret har en kavitet

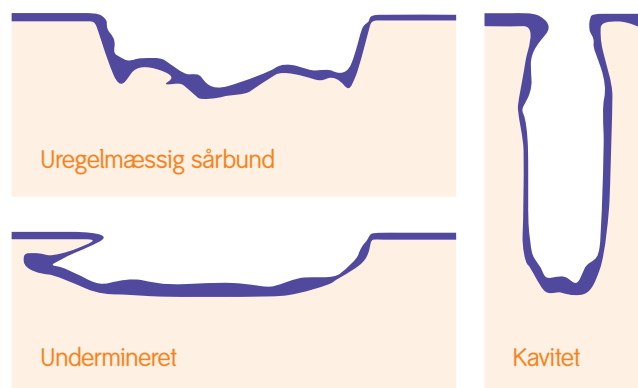

For detaljerede produktoplysninger, herunder indikationer for anvendelse, kontraindikationer, virkninger, forholdsregler, advarsler og vigtig sikkerhedsinformation henvises til produktets brugervejledning (IFU) før brug.

PICO sårfyldningsmateriale


Hvis såret er mere end 2 cm dybt, skal du anvende et passende NPWT sårfyldningsmateriale. Både gaze og skum kan anvendes ved behandling med PICO for at sikre, at det negative tryk når hele sårbunden.¹

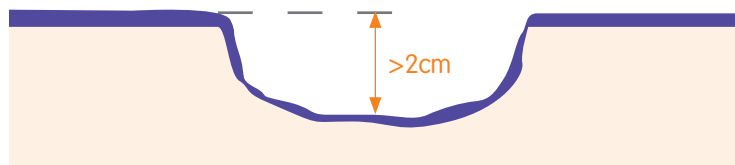

Eksempler på dybe sår

Applicering

Gaze

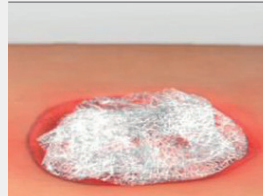



- Applicer et lag af antimikrobielt gaze fugtet med saline i såret. Fortsæt med at applicere gaze løseligt, indtil hele sårkaviteten er fyldt.
- Undlad at pakke gazen for hårdt.
- Sørg for, at gazen ikke ligger på huden omkring såret.

Foam filler



- Klip skummet, så det passer til sårets form og størrelse.
- Skummet må IKKE klippes direkte hen over såret.
- Sørg for, at skummet ikke ligger på huden omkring såret.

Bestillingsinformation

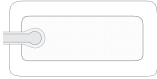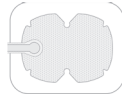Bandage	Størrelse	Kit med 2 bandager*	Kit med 1 bandage**	Bandagepakke***
	10cm x 20cm	66802002	66802012	66802022
	10cm x 30cm	66802003	66802013	66802023
	10cm x 40cm	66802004	66802014	66802024
	15cm x 15cm	66802005	66802015	66802025
	15cm x 20cm	66802006	66802016	66802026
	15cm x 30cm	66802007	66802017	66802027
	20cm x 20cm	66802008	66802018	66802028
	25cm x 25cm	66802009	66802019	66802029
	Mutisite small 15cm x 20cm	66802000	66802010	66802020
	Mutisite large 20cm x 25cm	66802001	66802011	66802021
Sårfyldningsmateriale		Varenummer		
	Skum	10cm x 12.5cm	66801021	
	Gaze	11,4cm x 3,7m	66802127	

* 2 bandager + 1 pumpe; **1 bandage + 1 pumpe; *** 5 bandager, ingen pumpe

Advanced Wound Management www.smith-nephew.com

Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
Danmark
T +45 45 80 61 00
F +45 45 80 61 51

©Varemærke tilhørende Smith & Nephew
Alle varemærker er godkendt
©Maj 2019 Smith & Nephew
19-05438

Supporting healthcare professionals for over 150 years

Referencer

1. Smith and Nephew 2018. The review of evidence supporting the use of PICO in wounds ≥ 2 cm in depth. Internal report. EO.AWM.PCS230.001.v2