

Introcan Safety[®] 3

Lukket sikkerheds-PVK

Oktober 2018



Sikker og effektiv IV adgang

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Introcan Safety® 3

Lukket PVK

IV adgang er et uundværligt element i dagens infusionsbehandling. Ikke desto mindre fortsat forbundet med potentielle risici for både patienter og sundhedspersonale.

Hos B. Braun har videreudviklet vort tredje generations IV kateter, Introcan Safety® 3 med det grundlæggende princip

“At gøre arbejdet med med IV adgang ...

- sikkert for sundhedspersonalet
- sikkert og trygt for patienten
- til en i høj grad effektiv procedure alt sammen uden at tilsidesætte den kliniske fleksibilitet.”

Med alsidighed fra start til slut åbner Introcan Safety® 3 mulighed for fleksibilitet til at imødekomme patientens individuelle behov, uden at man behøver ændre klinisk praksis:

- Pålidelig diagnostisk billedundersøgelse: 18 til 22 gauge katetre er velegnet til anvendelse med power injector med et maximumtryk på 300 psi.
- Sikker medicinindgift: Sammen med en forlængerslange skaber Introcan Safety® 3 et lukket system, som effektivt mindsker kontaminering og blodspild.


... Sikkert for sundhedspersonalet

Skader fra nålestik er fortsat en stor risiko som sundhedspersonalet vil stå over for i deres daglige arbejde. En undersøgelse har vist, at passive fuldautomatiske sikkerhedsmekanismer er mest effektiv til at forebygge skader.^{1,2}

Med B. Braun's Introcan Safety® 3, er man beskyttet af en fuldautomatisk sikkerhedsmekanisme.

Passiv sikkerhedsanordning:

- Aktiveres automatisk
- Kan ikke omgås
- Forbliver på plads ved bortskaffelse

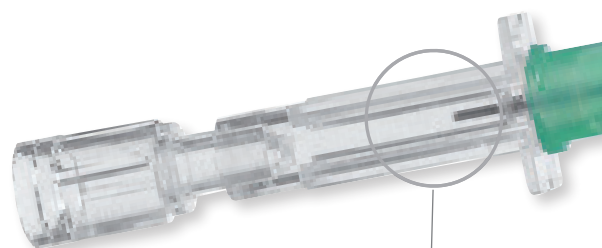


... Mere succesrig

Talrige forsøg på PVK anlæggelse kan betyde forsinket behandling, samt forøgede materialeomkostninger og øget tidsforbrug.

Med teknologien “Double Flashback” i Introcan Safety® 3, forbedres din succesrate ved det første nålestik, da synlig bekræftelse af, at både nål og kateter er sikkert på plads i venen.

Nåle-Flash

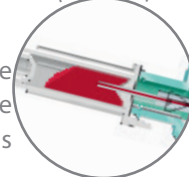

... Sikkert for patienten

Hvis et IV kateter ikke er fikseret tilstrækkeligt, er der risiko for IV komplikationer, som kan påvirke patientbehandlingskvalitet.³

Introcan Safety® 3 har integrerede stabiliseringsvinger, som er designet til at mindske kateterbevægelser. Dette for at mindske irritation og risiko for omlægning af PVK.

Stabiliseringsvinger

- Sikrer kateter stabilitet så mekaniske flebitter minimeres
- Designet så katetret ikke "kinker" når det føres ind i venen
- Luer sammenkobling er udformet så kontaminering ved sammenkobling minimeres

... Bekvem for patienten

Blodspild fra et IV kateter kan havne i sengen, på gulvet eller på tøjet. Dette kan medføre ekstra udgifter til rengøring og tabt sygeplejersketid.⁴

Multi Septum er konstrueret til at kontrollere blodstrømmen fra katetret under tilbagetrækning af nålen og mens man påsætter luer-sammenkobling.

Multi Septum

- Mindsker behovet for venekompression
- Funktionen virker mange gange
- Ingen blodspild - Ingen stress

Universal nålespids

- Mange valg af indstiksvinkel
- Glat kateterindføring

Double Flashback Teknologi

- Mindsker antallet af stikforsøg
- Blod i tilbageløbskammer bekræfter at kanylespids er i venen
- Blod i katetret bekræfter placering i venen

Kateter-Flash

Brugerfordele

- Beskyttelse mod nålestikskader
- Reducerer risiko for blodeksponering
- Forbedrer succes ved det første stik
- Mindsker IV komplikationer
- Mindre ubehag for patienten


Introcan Safety[®] 3

Lukket sikkerheds-PVK

Artikel nr.: (EU)	Gauge	Kateter længde (inch) (mm)		Kateter ø (mm)	Flow hastighed (ml/min)	Flow hastighed (ml/time)
4251127-01	24	$\frac{3}{4}$	19	0.7	22	1320
4251128-01	22	1	25	0.9	35	2100
4251129-01	20	1	25	1.1	65	3900
4251130-01	20	$1\frac{1}{4}$	32	1.1	60	3600
4251137-01	20	2	50	1.1	55	3300
4251131-01	18	$1\frac{1}{4}$	32	1.3	105	6300
4251132-01	18	$1\frac{3}{4}$	45	1.3	100	6000
4251133-01	16	2	50	1.7	185	11100
4251136-01	16	$1\frac{1}{4}$	32	1.7	195	11700
4251135-01	14	$1\frac{1}{4}$	32	2.2	325	19500
4251134-01	14	2	50	2.2	310	18600

Salgsenhed: 1 æske á 50 stk.

Indeholder ikke latex, PVC or DEHP.

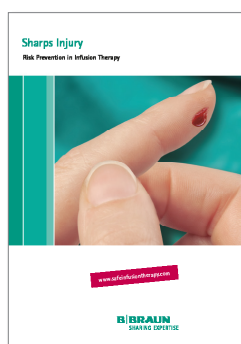

For yderligere information om Introcan Safety[®] og risikoforebyggelse, besøg:

www.safeinfusiontherapy.com

1. Tosini W, Ciotti C, Goyer F, Lolom I, L'Heriteau F, Abiteboul D, et al. Needlestick Injury Rates According to Different Types of Safety-Engineered Devices: Results of a French Multicenter Study. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2010 Apr;31(4):402-7
2. Iinuma Y, Takeshita M, Hashimoto Y, Fujihara N, Saito T, Takakura S, et al. Passive safety devices are more effective at reducing needlestick injuries. *J Hosp Infect.* 2005 Dec;61(4):360-1
3. Bausone-Gazda D, Lefaiver C, Walters S. A Randomized Controlled Trial to Compare the Complications of 2 Peripheral Intravenous Catheter-Stabilization Systems. *J Infus Nurs.* 2010 Nov/Dec;33(6):371-84
4. Richardson D, Kaufman L. Reducing blood exposure risks and costs associated with SPIVC insertion. *Nurs Manage.* 2011 Dec;42(12):31-4