


Mepore® Pro

Brusetæt, selvklæbende absorberende bandage

Mepore Pro er en selvklæbende, absorberende og luftgennemtrængelig bandage med en yderfilm som beskytter såret mod vand og kontaminering.

Den hudvenlige vandbaserede, opløsningsfri klæb sikrer en hudvenlig og samtidig sikker fiksering.

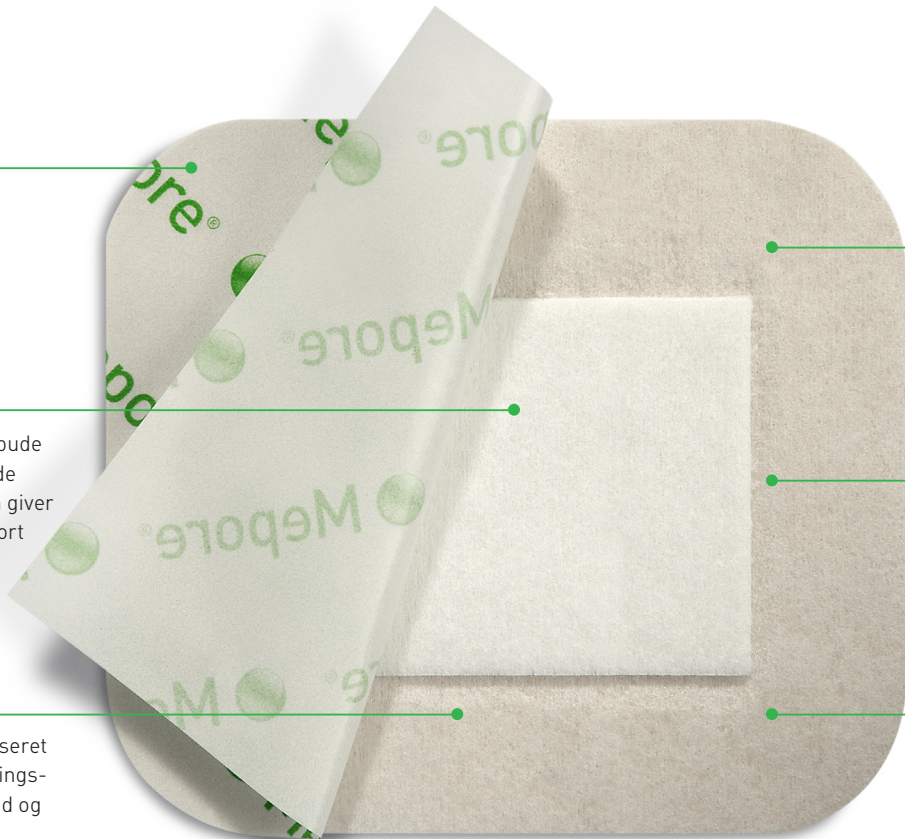

Let aftageligt beskyttelsespapir.

Absorberende sårpude med et let-hæftende sårkontaktlag som giver bedre patientkomfort og lavere skiftfrekvens.

Hudvenlig, vandbaseret klæb, uden opløsningsmidler. Giver en blid og sikker fiksering.

Blød, elastisk nonwoven. Giver en bedre patientkomfort.

Virus- og bakterietæt bagsidefilm som beskytter såret mod kontaminering udefra.

Åndbar og brusetæt film. Giver en bedre patientkomfort og lavere skiftfrekvens.

Sådan fungerer Mepore Pro

Bagsidefilmen tillader brusebad og beskytter såret mod vand og kontaminering. Den beskytter også tøj og sengetøj mod blod og væskegennemsvivning.

Sårpudens høje absorptionskapacitet samt yderfilmens høje permabilitet, giver tilsammen en effektiv væskehåndtering.

Polyakrylat klæben er hudvenlig og sikrer desuden en

sikker fiksering. Beskyttelsespapiret er let at fjerne og sikrer en steril og nem applicering af bandagen. Stabiliteten i produktets materiale/film er også med til at lette appliceringen.

Anvendelsesområder

Mepore Pro kan anvendes til en bred vifte af sårtyper med let til moderat væskniveau. Herunder postoperative sår, mindre brandsår, snitsår og hudafskrabninger.

Sådan anvendes Mepore Pro



Pakken åbnes og bandagen tages ud.



Tag fat i de overlappende dele af beskyttelsespapiret og træk indtil klæbefladen ses og fiksering kan påbegyndes.



Placer bandagen på huden uden at strække og fjern forsigtigt resten af beskyttelsespapiret. Glat klæbekanten for at sikre optimal hæftning til huden. Bandagen må ikke strækkes under påsætning!

Bandageskift

Skiftefrekvensen afhænger af sårets tilstand. Bandagen aftages ved at tage fat i kanten og langsomt trække den af i hårvækst retning.

Fordele ved Mepore Pro

- Tillader brusebad
- Det lethæftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at bandagen hænger fast i såret
- Beskytter såret mod vand og kontaminering udefra
- Virus- og bakterietæt
- Optimal absorptionskapacitet
- Let at anvende
- Sikrer at huden kan ånde
- Glat overflade, lav friktion mod tøj og sengetøj

- Hudvenlig vandbaseret klæb
- Runde hjørner som sikrer sikker fiksering (alle str. op til 9x15 cm)

Forholdsregler

For at sikre at der ikke opstår hudskader bør Mepore Pro ikke strækkes. Dette er især vigtigt, når bandagen lægges over led.



Mepore Pro er pakket i sterile enkelt pakninger

Art. nr.	Størrelse cm	Sårpude cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
670820	6 × 7 cm	3 × 4 cm	60	480
670920	9 × 10 cm	4,5 × 6 cm	40	320
671020	9 × 15 cm	4,5 × 10 cm	40	320
671120	9 × 20 cm	4,5 × 15 cm	30	180
671220	9 × 25 cm	4,5 × 20 cm	30	180
671320	9 × 30 cm	4,5 × 25 cm	30	270

Apotekssortiment:

680840	6 × 7 cm	3 × 4 cm	10	140
680940	9 × 10 cm	4,5 × 6 cm	10	200
681040	9 × 15 cm	4,5 × 10 cm	10	140
681140	9 × 20 cm	4,5 × 15 cm	10	140

Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33
3450 Allerød
Tlf. 48 168 168
www.molnlycke.dk

Symbolet og den tilhørende tekst er begge registrerede varemærker eller patentanmeldte varemærker tilhørende Mölnlycke Health Care

