



DEN EFFEKTIVE ABSORBERENDE SKUMBANDAGE

- Minimerer smerte for patienten, traume mod såret og den omkringliggende hud ved bandageskift^{1,2}
- Nænsom vedhæftning, og meget behagelig at have på
- Sikker fiksering, bliver på plads og kan klippes til*

Safetac® lag:

- Reducerer smerte og traume før, under, og efter bandageskift¹
- Klæber ikke til det fugtige sårleje, men blidt til den tørre omkringliggende hud
- Forsegler sårkanterne og reducerer risikoen for maceration³

Absorberende skumpude

- Absorberer ekssudat
- Velegnet til brug under kompression
- Formbar



Polyuretan filmbagside

- Åndbar
- Vandtæt
- Bakterie- og virusbarriere*

SafetaC
TECHNOLOGY


Safetac® teknologi

Bemærk: Mepilex behøver ikke at klippes til så den passer såret, når kompression anvendes


Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på www.safetac.com

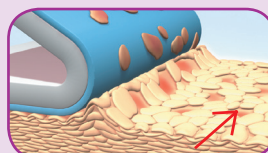


Stripping af hudceller med traditionel klæb

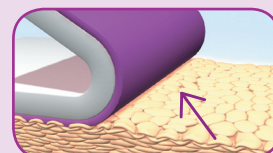

Ingen stripping af hudceller med Safetac teknologi

* Mikrober større end 25 nm


Sådan anvendes Mepilex®

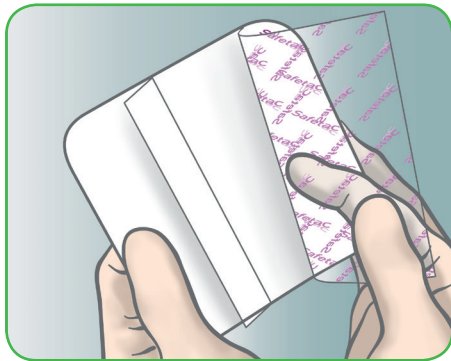

Rens såret efter normal procedure.
Fjern beskyttelsesfilmen.



Mepilex skal overlape sårlejet med mindst 2 cm på den omkringliggende hud.
Applicer den klæbende side af bandagen mod såret. Stræk ikke bandagen.

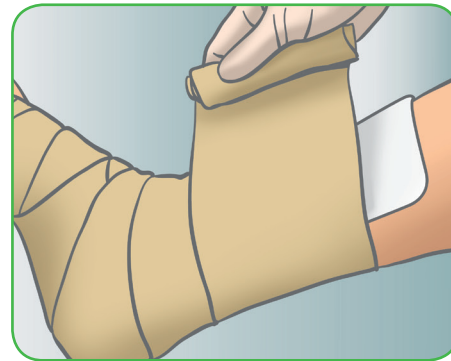

Hvis nødvendigt kan Mepilex fikseres med tape, tubebandage (fx. Tubifast 2-Way Stretch) eller anden fiksering.

Sådan virker Mepilex

Mepilex er en blød og meget formbar skumbandage, der absorberer væske og bevarer et fugtigt sårmiljø. Safetac laget forsegler sårkanterne, hvilket forhindrer væsken i at løbe ud på den omkringliggende hud og minimerer risikoen for maceration. Safetac laget sikrer et atraumatisk bandageskift. Mepilex kan klippes til, så den passer til forskellige sårstørrelser og områder.

Fordele ved Mepilex

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Frigør begge hænder til applicering af kompressions- eller fikseringsbandager
- Velegnet til brug under kompression
- Kan klippes til, så den passer til forskellige sårstørrelser og områder, der er vanskelige at bandagere
- Er behagelig for patienten ved brug
- Kan blive siddende i flere dage, afhængig af sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uden at miste klæbeevnen
- Minimal risiko for hudirritation og allergi

Anvendelsesområder

Mepilex er udviklet til en bred vifte af væskende sår, som ben- og fodsår, tryksår og traumatisk sår, f.eks. skin tears og sekundær ophelende sår.

Bemærk

Ved kliniske tegn på infektion bør en læge kontaktes for korrekt infektionsbehandling.



MEPILEX SORTIMENT (Sterilt pakket)

Art. nr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12

MEPILEX HEEL SORTIMENT

288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30