

Mepilex® Lite

DEN TYNDE EFFEKTIVE ABSORBERENDE SKUMBANDAGE

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift^{1,2}
- Nænsom vedhæftning og meget behagelig at have på
- Sikker fiksering, bliver på plads og kan klippes til*

Safetac® lag

- Reducerer smerte og traume før, under og efter bandageskift¹
- Klæber ikke til det fugtige sårleje, men blidt til den tørre omkringliggende hud
- Forsegler sårkanterne og reducerer risikoen for maceration³

Absorberende skumpude

- Absorberer ekssudat
- Velegnet til brug under kompression
- Formbar

Polyuretan filmbagside

- Åndbar
- Vandtæt
- Bakterie- og virusbarriere*




Safetac® teknologi

Bemærk: Mepilex Lite behøver ikke at klippes til så den passer såret, når kompression anvendes

Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på www.safetac.com

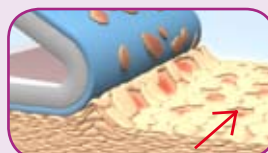


Stripping af hudceller med traditionel klæb



Ingen stripping af hudceller med Safetac

* Mikrober større end 25 nm


Sådan anvendes Mepilex® Lite

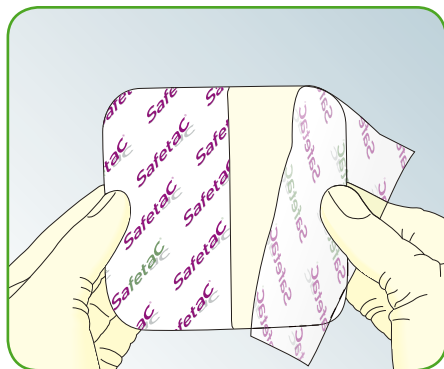

Rens såret efter normal procedure.
Fjern beskyttelsesfilmen.



Mepilex Lite skal overlape sårlejet med mindst 2 cm på den omkringliggende hud.
Appliker den klæbende side af bandagen mod såret. Stræk ikke bandagen.

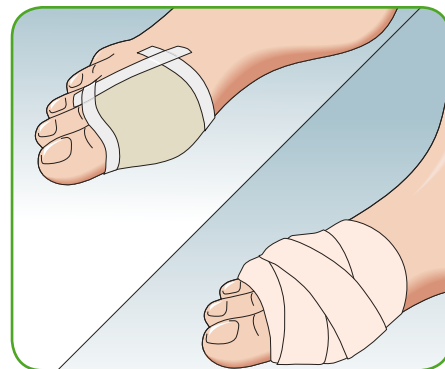

Hvis nødvendigt kan Mepilex Lite fikseres med tape, tubebandage (fx. Tubifast 2-Way Stretch) eller anden fiksering.

Sådan virker Mepilex Lite

Mepilex Lite er en tynd og meget formbar skumbandage, der absorberer væske og bevarer et fugtigt sårmiljø. Safetac laget forsegles omkring sårkanterne, hvilket forhindrer væsken i at løbe ud på den omkringliggende hud og minimerer risikoen for maceration. Safetac laget sikrer et atraumatisk bandageskift. Mepilex Lite kan klippes til, så det passer til forskellige sårstørrelser og områder.

Fordele ved Mepilex Lite

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Frigør begge hænder til applicering af kompressions- eller fikseringsbandager
- Større patienttilfredshed, er tynd og meget behagelig at have på
- Kan anvendes under strålebehandling med uændret energimængde og stråledosis
- Velegnet til brug under kompression
- Kan klippes til, så den passer til forskellige sårstørrelser og områder, der er vanskelige at bandagere
- Kan blive siddende i flere dage, afhængig af sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uden at miste klæbeevnen
- Minimal risiko for hudirritation og allergi

Anvendelsesområder

Mepilex Lite er udviklet til en bred vifte af væskende sår, som ben- og fodsår, tryksår og traumatiske sår, f.eks. rifter og sekundært ophelede sår.

Bemærk

Ved kliniske tegn på infektion bør en læge kontaktes for korrekt infektionsbehandling.



MEPILEX LITE SORTIMENT (sterilt pakket)

Art. nr.	Size cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	2	12