


Mepilex® Transfer

Blødt formbart silikone skumkontaktag

- Atraumatisk mod såret og den omkringliggende hud ved skift
- Transporterer sårveske væk fra såret og minimerer risikoen for maceration
- Muliggør håndtering af sår som ellers er svære at bandagere

Tyndt skumlag

- Transporterer ekssudat væk fra såret
- Former sig efter kroppen, selv på områder der ellers er svære at bandagere
- Egnede til store sår og skrøbelige hud

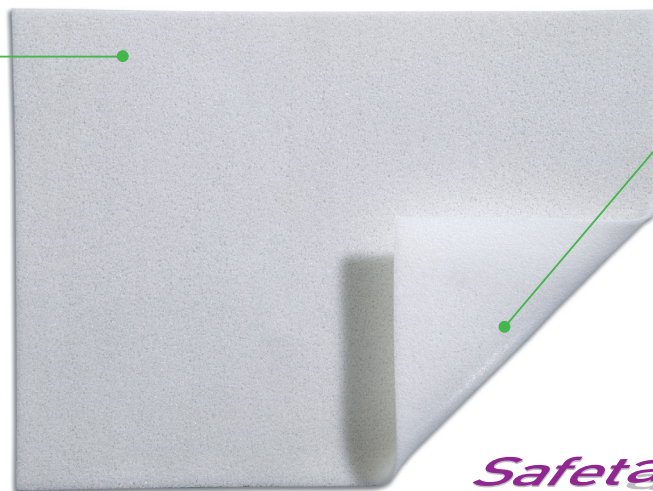

Safetac® lag (blød silikone)

- Atraumatisk mod såret og den omkringliggende hud ved skift
- Minimerer risikoen for maceration


Safetac®
TECHNOLOGY

Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre traume. Mindre smerte.™

Safetac® er en patenteret blød silikone klæbeteknologi. Bandager med Safetac teknologi er atraumatiske ved aftagning. Bandagerne minimerer traume mod såret og den omkringliggende hud, og mindsker derved smerte hos patienten. Risikoen for maseration minimeres ved at bandagen forsejler sårkanterne.

Læs mere på: www.safetac.com

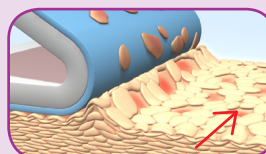

Stripping af hudceller med traditionel klæb

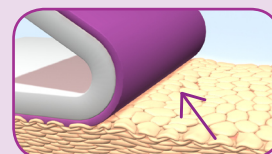

Ingen stripping af hudceller med Safetac


Sådan anvendes Mepilex Transfer

Mepilex Transfer er tynd og formbar og sammen med det bløde silikone Safetac lag, sikres en direkte kontakt til såret og den omkringliggende hud selv på ujævne overflader. Safetac laget slutter sig omkring såret, og strukturen i skummet tillader eksudat at trænge vertikalt op i en sekundær absorberende bandage. Mepilex Transfer opretholder et fugtigt sårmiljø i kombination med en velegnet sekundær bandage. Kan også anvendes som beskyttelseslag.


Anvendelsesområde

Mepilex® Transfer er velegnet til en bred vifte af væskende sår samt velegnet til vanskelig bandagerbare områder – f.eks. cancersår. Mepilex Transfer kan også anvendes som beskyttelseslag på sår, der ikke væsker eller store områder med skrøbelig hud. Mepilex Transfer kan anvendes under kompression. Anvend en velegnet sekundær bandage for at opretholde et fugtigt miljø.


Brugsanvisning

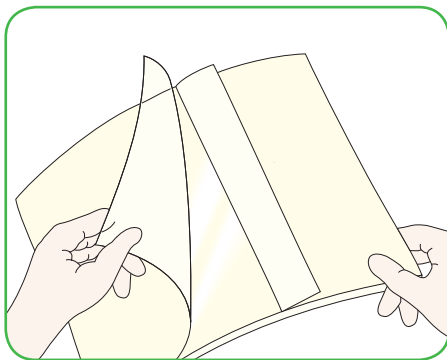

Rens såret og aftør den omkringliggende hud. Fjern den øverste del af beskyttelsespapiret.

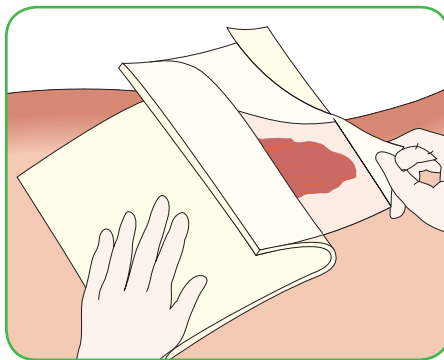

Mepilex Transfer skal overlape den omkringliggende hud med mindst 5 cm.

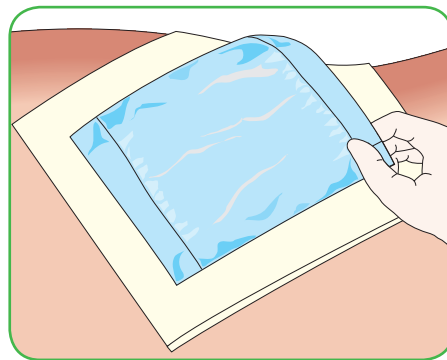

Påsæt en velegnet sekundær bandage og fikser.

Fordele ved Mepilex Transfer

- Transporterer eksudat væk fra såret
- Atraumatisk mod såret og den omkringliggende hud
- Former sig efter kroppens konturer
- Kan klippes til i størrelsen
- Minimerer risikoen for maceration
- Øger patientkomforten
- Kan anvendes under stråleterapi uden at ændre energirate og dose

Bemærk

Ved klinisk tegn på infektion konsulteres en læge for opstart af infektionsbehandling.

Hvad er Safetac®?

Safetac® er en patenteret silikone hæfteteknologi, som giver en blid tilhæftning til huden. Bandager med Safetac teknologi er atraumatiske både under brug og ved bandageskift.¹⁻³

Referencer:

1. Dahlström K K. A new Silicone Rubber Dressing used as a Temporary Dressing before Delayed Split Skin Grafting. Scand J Plast Reconstr. Hand surg 1995;29:325-327.
2. Platt A J, et al. A Comparative Study of Silicone Net Dressing and Paraffin Gauze Dressing in Skin-Grafted Sites. Burns 1996;22:7:543-545.
3. Dykes P J et al. Effects of Adhesive Dressings on the Stratum Corneum of the Skin. Journal of Wound Care 2001;10:2:7-10.



MEPILEX TRANSFER SORTIMENT

Art.nr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
294600	7,5 × 8,5	5	70
294700	10 × 12	5	50
294800	15 × 20	5	40
294502	20 × 50	2	12

Mepilex Transfer er steril pakket

Mölnlycke Health Care ApS
 Gydevang 33, 3450 Allerød
 Tlf. 48 168 168
www.molnlycke.com

Symbolet og billedeteksten er registrerede varemærker eller varemærker som tilhører Mölnlycke Health Care.