



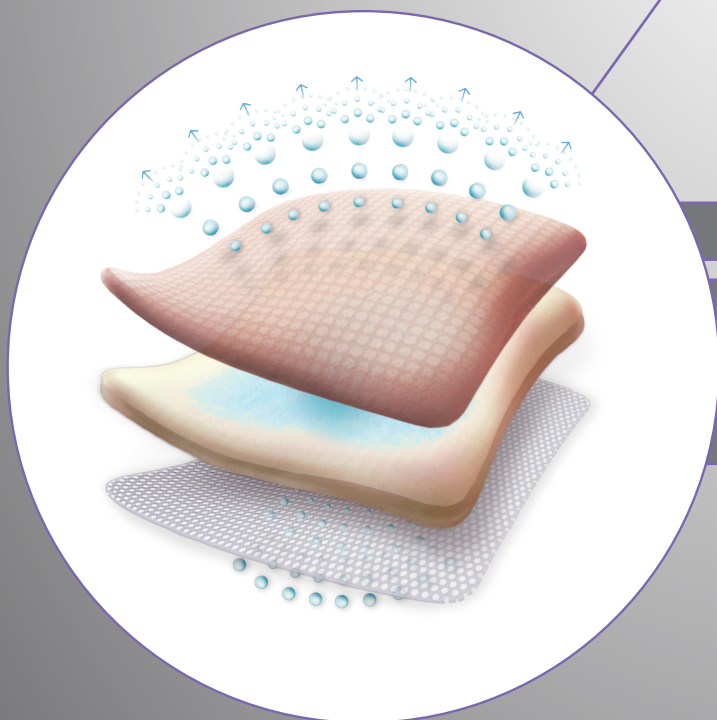

Permeabel film<sup>1</sup>

Absorberende<sup>1</sup> skum med  
sølvulfadiazin

Skånsom soft gel klæb<sup>2</sup>

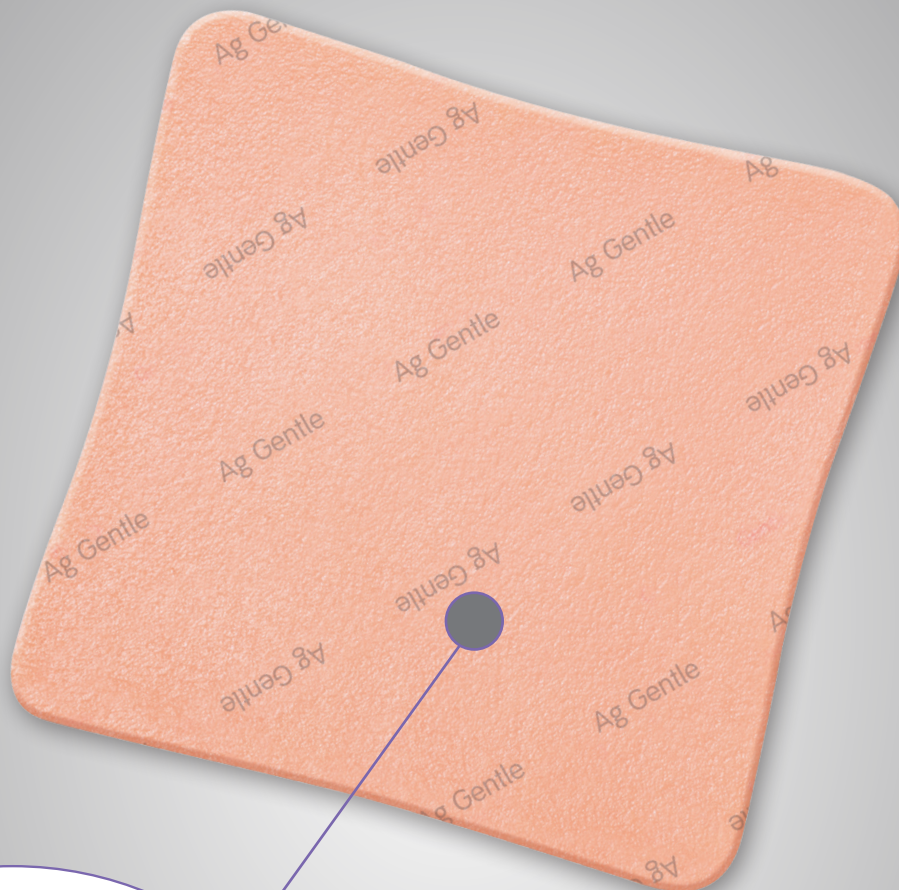

 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup>**  
Ag Gentle

ALLEVYN® Ag Gentle håndterer væske via en unik trelagsteknologi, der absorberer, tilbageholder og slipper overskydende væske igennem og opretholder en optimal fugtbalance der understøtter sårhelingen<sup>3</sup>. Den hydrocellulære skumpude indeholder sølvsulfadiazin der leverer en vedvarende antimikrobiel effekt (dokumenteret *in-vitro*)<sup>5</sup>.

- Unik trelagsteknologi bestående af en åndbar topfilm, en højabsorberende hydrocellulær skum<sup>1</sup> og en skånsom soft gel klæb
- Skånsom soft gel klæb der er meget velegnet til sart og skrøbelig hud<sup>4</sup>
- Blød og behagelig for patienten, idet bandagen tilpasser sig kroppens former på svært bandagerbare områder<sup>3</sup>
- Let at applicere og at fjerne<sup>2</sup>, den skånsomme klæb holder bandagen på plads under applicering af sekundær fiksering<sup>2</sup>
- Velegnet til anvendelse under kompressionsbandage<sup>2</sup>
- Dokumenteret *in-vitro* mod et bredt spekter af bakterier inklusiv antibiotikaresistente bakterier som *Pseudomonas*, *Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA) og *Vancomycin Resistant Enterococcus* (VRE)<sup>5</sup>
- Sikrer en vedvarende antimikrobiel effekt i op til 7 dage *in-vitro*<sup>5</sup>

## Indikationer

Overfladiske, granulerende, kroniske og akutte væskende sår, overfladiske og dybe sår som tryksår, bensår og diabetiske fodsår, inficerede sår, maligne sår, kirurgiske sår, første- og andengradsforbrændinger, donorsteder, ildelugtende sår, hudrifter og epidermolysis bullosa sår.

## Applicering

Rens såret i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Vælg en passende bandagestørrelse. ALLEVYN Ag Gentle kan klippes til, så den passer til svært bandagerbare områder. Brug altid en ren teknik, når bandagen klippes til. Klargør og rens huden omkring såret og fjern overskydende fugt. Fjern eventuelt hår, for at sikre at bandagen slutter tæt til huden.


Fjern beskyttelsesfilmen ved ren teknik og applicer ALLEVYN Ag Gentle, med den klæbende side mod såret. Sørg for at bandagen har god kontakt til huden omkring såret og fiksér med sekundær bandage, f. eks. OPSITE® Flexifix, OPSITE® Flexifix Gentle film. ALLEVYN Ag Gentle kan løftes og re-appliceres uden at miste sin klæbeevne. ALLEVYN Ag Gentle kan anvendes i kombination med andres behandlinger, f. eks. kompression, under tilsyn af sundhedspersonale. Når bandagen bruges under kompression, skal den klippes til, så den passer til sårets størrelse uden at overlape den omgivende hud. Sørg for, at bandagen hæfter med korrekt placering, inden kompressionsbandagen anlægges. Hvis bandagen er blevet klippet til, skal det sikres, at blottagte skumområder dækkes med en passende filmbandage. Pas på ikke at dække hele bandagen.

## Bandageskift

I de tidlige stadier af sårbehandlingen skal ALLEVYN Ag Gentle inspiceres i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Ved brug på inficerede sår, skal infektionen tilses og behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Bandagen kan blive siddende på såret i op til 7 dage, eller indtil ekssudat er synligt og nærmer sig 1,5 cm fra bandagens kant, alt efter hvad der indtræffer først. Bandager i det sakrale område kan blive siddende i op til 5 dage. Grundet øget risiko for kontamination og infektion i dette område, bør bandagens tilhæftning inspiceres hyppigt og i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Beslutningen om bandageskift er en klinisk vurdering med hensynstagen til lokale retningslinjer.

## Fjernelse af bandagen

ALLEVYN Ag Gentle fjernes ved tage den sekundære fiksering af og løfte bandagen fra såret.

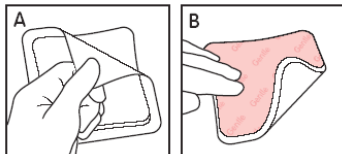

ALLEVYN - Proud to put people first

For patients. For budgets. For today.®

Wound Management  
Smith & Nephew A/S  
Slotsmarken 14  
2970 Hørsholm

www.smith-nephew.com  
sn.dk@smith-nephew.com

®Varemærke tilhørende Smith & Nephew  
™Alle varemærker godkendt  
© Smith & Nephew september 2014  
14-03492-DK



## Kontraindikationer

- Må ikke anvendes til patienter med kendt allergi over for SSD eller sulfonamider.
- Da sulfonamider kan forårsage kernicterus, bør ALLEVYN Ag Gentle ikke anvendes til gravide der nærmer sig termin, eller ammende eller på præmature og nyfødte børn indenfor de første måneder efter fødslen.

## Forholdsregler

- Kun til udvortes brug.
- ALLEVYN Ag Gentle må ikke anvendes med oxiderende midler som hypokloritopløsninger (f. eks. EUSOL) eller brintoverilte, da disse kan nedbryde bandagens absorberende polyurethankomponent.
- ALLEVYN Ag Gentle bør ikke anvendes sammen med topisk antimikrobiel behandling.
- Ved klinisk infektion, kan topisk behandling med sølv ikke erstatte behovet for systemisk behandling eller anden nødvendig behandling af infektionen.
- Fælles for klæbende produkter er at der i sjældne tilfælde rapporteres om irritation og/eller maceration af huden omkring såret. Opstår rødme eller hudreaktion, bør behandling ophøre og sundhedspersonale bør konsulteres.
- Bemærk at uhensigtsmæssigt brug eller hyppige bandageskift, især hos patienter med skrøbelig hud, kan medføre hudirritation eller stripping af huden.
- Undgå kontakt med elektroder eller ledende geler under elektorniske undersøgelser som f. eks. EEG (Elektroencefalogram) og EKG (Elektrokardiogram).
- Når ALLEVYN Ag Gentle anvendes under MR-scanning kan patienten opleve varmeudvikling.
- ALLEVYN Ag Gentle må ikke anvendes sammen med oliebaseerede produkter som f. eks. petrolatum.
- ALLEVYN Ag Gentle bør ikke anvendes alene på dybe sår med kaviteter, men kan anvendes som sekundær bandage.
- Følgende forholdsregler er gældende og fælles for produkter der indeholder SSD, især når en større overflade dækkes med bandagen:
  - Forsigtighed ved brug på patienter med signifikant nedsat lever- eller nyrefunktion.
  - Forsigtighed ved brug på individer med kendt G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase) mangel.
  - Effekten af systemisk medicinsk behandling kan påvirkes. Det gælder specielt for peroral hypoglykæmisk behandling og for phenytoin. Det anbefales da at monitorere plasmakoncentrationerne da disse kan forhøjes.
- ALLEVYN Ag Gentle er et engangsprodukt.

## Produktsortiment

| Varenummer | Størrelse  | Antal pr æske |
|------------|------------|---------------|
| 66800440   | 5 x 5 cm   | 10            |
| 66800441   | 10 x 10 cm | 10            |
| 66800442   | 10 x 20 cm | 10            |
| 66800443   | 15 x 15 cm | 10            |
| 66800444   | 20 x 20 cm | 10            |

## Referencer

1. Smith & Nephew Medical Ltd. Report Ref: DS/08/107/R1b ALLEVYN Ag Gentle Dressings Physical Properties. Carpenter S. Nov. 2008.
2. Data on File Report Ref: 0711086 Results from a 7 day volunteer trial evaluating ALLEVYN Gentle dressings in terms of pain on removal, dressing retention and other physical characteristics. A. Bond Dec 2007.
3. The clinical and physical properties of ALLEVYN Ag Gentle dressings and the moist wound environment. Myers D. April 2009.
4. Smith & Nephew technical Justification AG001.
5. Smith & Nephew Research Centre Report Ref: RR-WMP07330-10-03. The equivalence of the antimicrobial efficacies of the ALLEVYN Ag foam variants against key wound pathogens. Driffield K, Woodmansey E. 25/03/2009.