


# SORBACT® FOAM DRESSING

Infektionsforebyggende skumbandage

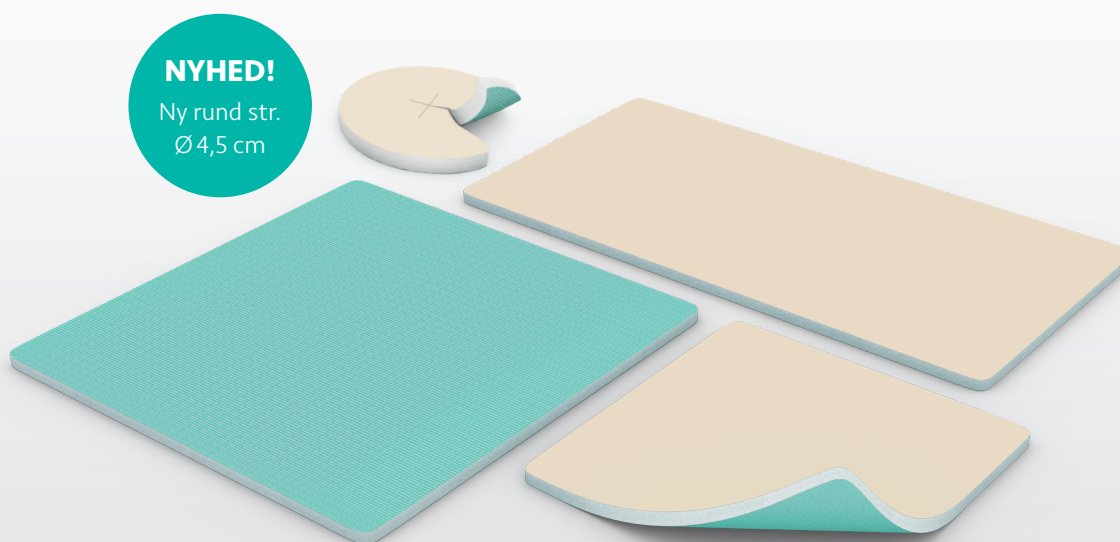

## REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING I MODERAT VÆSKENDE SÅR

*Sorbact® Foam Dressing er en steril skumbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag kombineret med polyurethanskum og en semipermeabel bagside. Sorbact® Foam Dressing absorberer og holder på eksudat, hvilket reducerer risikoen for maceration og opretholder et fugtigt sårmiljø. Overskydende væske kan fordampe igennem den semipermeable bagside.*

| Produkt                              | Varenr. | Størrelse | Stk./pakke |
|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| Sorbact® Foam Dressing               | 98310   | 10x10 cm  | 10         |
| Sorbact® Foam Dressing               | 98315   | 15x15 cm  | 10         |
| Sorbact® Foam Dressing               | 98320   | 10x20 cm  | 10         |
| Sorbact® Foam Dressing <b>NYHED!</b> | 98325   | Ø 4,5 cm  | 10 x 4     |




## TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact® Foam Dressing er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerende eller inficerede sår, der er lavt til moderat væskende, såsom postoperative sår, traumesår, tryksår, diabetiske sår og sår på fødder og ben.

## BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Sårpuden skal dække såret med et overlap på mindst 2 cm.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Ved tilklipning af bandagen skal der anvendes steril teknik. Kassér åbne og ubrugte bandager.
5. Læg bandagen på. Sørg for, at den grønne side af bandagen er i direkte kontakt med hele såret.
6. Fiksér med passende sekundærbandage.
7. Bandagens skiftetofrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau samt sårets og den omgivende huds generelle tilstand. Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.

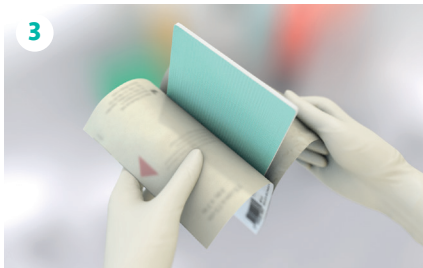

## SORBACT® – FOREBYGGER OG BEHANDLER SÅRINFEKTIONER

Baseret på naturlige processer og fysiske interaktioner, fjerner Sorbact® bakterier for at forebygge og behandle sårinfektion uden at frigive aktive stoffer til såret.

Læs mere på [sorbact.dk](https://sorbact.dk)

Sorbact® Technology er en unik innovation, som anvendes i vores avancerede sårbehandlingsprodukter, for at forebygge og behandle sårinfektioner. Produkter med Sorbact® teknologien hjælper patienter i mere end 65 lande gennem vores brands Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Leukomed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact® og Cutimed® Sorbion® Sorbact®.