

## Oversigt over fordelene

- Hurtig, nem og sikker applikation
- Funktionel position
- Understøtter smertelindring
- Latex-fri
- Åndbar
- 100 % røntgengennemskinnelig
- Ultralet design
- Minimal opbevaringsplads
- Kan tilpasses med en almindelig saks



### Bestillingsinformation

Varenr	Størrelse	Antal pr. enhed
<b>Delta-Xpress™ håndledsskinne</b>		
72712-00	S	10
72712-01	M	10
72712-02	L	10
<b>Delta-Xpress™ hånd- og håndledsskinne</b>		
72713-00	S	10
72713-01	M	10
72713-02	L	10
<b>Delta-Xpress™ albueskinne</b>		
72710-00	S	10
72710-01	M	10
72710-02	L	10

Delta-Xpress™ underbensskinne		
72711-00	S	10
72711-01	M	10
72711-02	L	10
<b>Delta-Xpress™ knæskinne</b>		
72714-01	M	6

Delta-Xpress™ burrebåndssæt		
72798-01	S (2,5 x 30 cm)	10
72798-00	L (5 x 45 cm)	10

## Delta-Xpress™

Gør klar til hurtig immobilisering



- Hurtig og nem applikation
- Sikker immobilisering i funktionel position
- Understøtter smertelindring
- 100 % røntgengennemskinnelig

## Fiksering i Xpress Style: Hurtigt. Nemt. Sikker.



## Delta-Xpress™ Hvorfor giver dette produkt den hurtigste og nemmeste immobilisering?

**Delta-Xpress™** er et innovativt, brugsklart skinnedesign til hurtig, nem og sikker immobilisering. Til brug ved akut immobilisering, ved overførsel til videre behandling eller i forbindelse med postoperativ behandling – **Delta-Xpress™** er altid den perfekte løsning.



### Tidsbesparende – den hidtil hurtigste immobilisering

- Præfabrikeret design muliggør øjeblikkelig applikation
- Ingen aktivering, ingen hærdning, ingen rengøring
- Instruktioner og ikoner på produktet understøtter hurtig og korrekt applikation



### Applikation – næsten lige så nemt som at sætte et stykke plaster på

- Produktet leveres klar til brug
- Fiksering med bandage eller burrebånd (anbefales til brug sammen med selvhæftende bandage)
- Kræver ikke aktivering med vand, kræver heller ikke særlig plads ved applikation
- Nem og sikker applikation garanteres



### Immobilisering – sikker og stærk

- Stift kompositmateriale
- Indbyggede vinkler holder den pågældende ekstremitet i den optimale stilling for heling
- God fleksibilitet for individuel pasform




# Pålidelig immobilisering

## Delta-Xpress™-produktserien

**Delta-Xpress™** tilbyder fem forskellige design til immobilisering ved skade på hhv. underben, arm, knæ, hånd og håndled. Ud over ultrahurtig applikation, brugervenlighed og sikker immobilisering giver disse unikke produkter forskellige ekstra fordele:

- Indvendig polstring sikrer komfort og stødabsorbering
- Åndbarhed medvirker til forhindring af hudmaceration
- Kan tilpasses med almindelig saks
- Nem adgang til sår
- Skinnerne leveres i flere størrelser med praktisk måleskala og farvekode på produktet
- 100 % røntgengennemskinnelig
- Genanvendeligt materiale


### ▪ Håndledsimmobilisering

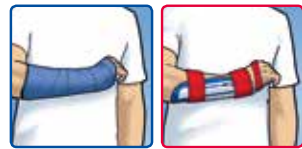

- Stiv støtte sikrer optimal håndledsstilling
- Håndledsvinkel i en 30° dorsal forlængelse sikrer en funktionel position under behandlingen



### ▪ Hånd- og håndledsimmobilisering

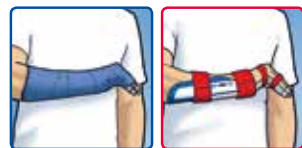

- Stiv støtte giver optimal håndleds-, hånd- og fingerstilling
- Støtten har en vinkel på 100°, der understøtter bøjningen af MP-leddet og stabiliserer håndleddet i 30° dorsal forlængelse




### ▪ Albueimmobilisering



- En forudtilpasset 90°-vinkel sikrer en optimal stilling for healing af overarm, albue og underarm



### ▪ Knæskinne

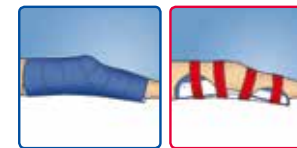

- En forudtilpasset 20° vinkel sikrer en ideel stilling for stabilisering af knæleddet
- Knævinkel på 20° dorsal forlængelse sikrer en funktionel position under behandlingen
- Polstring ved knæhaserne giver øget komfort



### ▪ Underbensimmobilisering



- En forudtilpasset 90°-vinkel sikrer en ideel stilling for healing af underben, ankel og fod
- Et støtteindlæg giver optimal fodstilling
- Polstring ved malleoler giver øget komfort



# Delta-Xpress™

Løsningen til mange indikationer



## Indikationer, hvor Delta-Xpress™ kan anvendes:



- Posttraumatisk nødimobilisering/t-stabilisering
- Primær pleje af bløddelsskader
- Postoperativ immobilisering/stabilisering
- Midlertidig immobilisering/stabilisering under røntgenundersøgelse
- Midlertidig immobilisering/stabilisering før applikation af mere langvarig skinne eller bandage

**Quick  
Easy  
Secure!**

**Delta-Xpress™** er et banebrydende nyt skinnesystem, der gør det muligt at immobilisere ekstremiteter på brøkdelen af den tid, der kræves sammenlignet med konventionelle skinner eller bandager. Det præfabrikerede design er intuitivt at bruge og sparer mange tidskrævende trin, samtidig med at det giver en sikker og stærk immobilisering.

## ■ Hvor?

- På skadestuen, i venteområdet for patienter
- Under overførsel til yderligere diagnostik, f.eks. røntgen, CT eller MR
- På operationsstuen før og efter operation

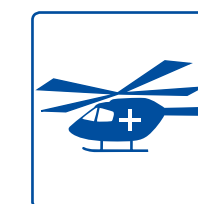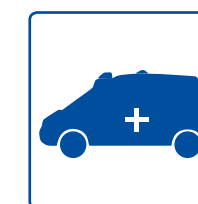

## ■ Hvornår?

- Når kortvarig immobilisering eller stabilisering er nødvendigt