

Actico® UlcerSys

Understrømpe



Actico UlcerSys understrømpe er en del af Actico UlcerSys kompressionsstrømpesystemet til behandling og recidivforebyggelse af venøse bensår. Den behagelige understrømpe kan også anvendes alene, hvis kun en let kompression er påkrævet. Strømpen opbygger et tryk på 10–14 mmHg, forsyner benet med

det behandlingsmæssigt nødvendige tryk og kan blive på dag og nat. Understrømpen tåles godt af huden og trækkes på direkte over sårbandagen. Såfremt påtagningen af det 2-lags kompressionsstrømpesystem ikke er mulig, kan understrømpen også anvendes i maks. 2–3 lag oven på hinanden for at opnå et passende tryk.

Anvendelsesområder

- til behandling af venøse bensår efter ødemreduktion
- til forebyggelse af tilbagevendende kroniske, venøse ulcera
- ved stasesdermatitis (f.eks. eksem, pigmentering, lipodermatosklerose, atrophie blanche)
- ved venøse ødemer
- til behandling af posttrombotisk syndrom
- til efterbehandling i forbindelse med skleroserende behandling og variceoperationer
- efter udtagning af vener til en bypass-op

Egenskaber

- 70 % polyamid, 30 % Lycra®
- 10–14 mmHg

Længde

- lægstrømpe
- 2 længder: standard & lang

Detaljer

Fås i pakke med 3 stk. og i 2 farver:

- hvid
- sand

Komfortabel: Understrømpen.



kan anvendes i 2–3 lag
over hinanden

1 lag ~ 12 mmHg
2 lag ~ 24 mmHg
3 lag ~ 36 mmHg



fikserer sårbandagen

flad elastikkant,
så strømpen
sidder godt


særlig strikkonstruktion
(inlay-yarn) sørger for,
at strømpen sidder
permanent godt

flad søm ved tærne
for høj komfort

forstærket hælkonstruktion

Sådan måler du:

- **Målepunkt cC:** på læggens tykkeste sted
- **Målepunkt cB:** 2–3 cm over malleolen

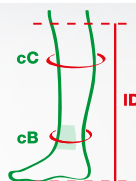

■ Længde-ID:

2–3 cm under knæhasen og til gulv

Actico® UlcerSys Understrømpe NYHED

Farve	Længde	Størrelse	Ankelomkreds cB (cm)	Lægomfang cC (cm)	Benlængde ID (cm)	REF	Pakning
	Standard	S	19–21	31–39	38–42	32 530	3/150
		M	21–23,5	33–41	38–42	32 532	3/150
		L	23–27	35–44	38–42	32 534	3/150
		XL	27–32	39–48	38–42	32 536	3/150
		XXL	32–37	43–52	38–42	32 538	3/150
	Lang	S	19–21	31–39	> 42	32 531	3/150
		M	21–23,5	33–41	> 42	32 533	3/150
		L	23–27	35–44	> 42	32 535	3/150
		XL	27–32	39–48	> 42	32 537	3/150
		XXL	32–37	43–52	> 42	32 539	3/150
	Standard	S	19–21	31–39	38–42	39 740	3/150
		M	21–23,5	33–41	38–42	39 742	3/150
		L	23–27	35–44	38–42	39 744	3/150
		XL	27–32	39–48	38–42	39 746	3/150
		XXL	32–37	43–52	38–42	39 748	3/150
	Lang	S	19–21	31–39	> 42	39 741	3/150
		M	21–23,5	33–41	> 42	39 743	3/150
		L	23–27	35–44	> 42	39 745	3/150
		XL	27–32	39–48	> 42	39 747	3/150
		XXL	32–37	43–52	> 42	39 749	3/150