



Succes i sigte


At levere **sikker og effektiv** patientbehandling kan være udfordrende, især ved anlæggelse af perifere IV-katetre. **At være i stand til at se kateterets placering i venen øjeblikkeligt, i første forsøg**, giver klinikerne tryghed og øger patientsikkerheden.

Vi præsenterer BD Venflon™ Pro Safety IV-kateter med sikkerhedsmekanisme og BD Instaflash™ nåleteknologi.



BD Venflon™ Pro Safety IV-kateter med sikkerhedsmekanisme leveres nu med BD Instaflash nåleteknologi, der forbedrer effektivitet og sikkerhed hos klinikerne.

BD Instaflash nåleteknologi bekræfter øjeblikkeligt karadgang ved anlæggelsen og er designet til at forbedre succesraten ved anlæggelse. Dermed reduceres antallet af forsøg.

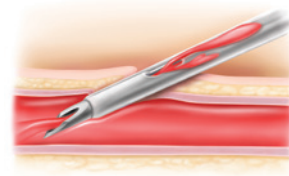

1. Forbedret patientoplevelse

BD Instaflash nåleteknologi inkorporerer et udstanset vindue i nålen, der kan **forbedre succesraten ved anlæggelse** og **reducere smertefulde mislykkede forsøg**.

2. Fremmer en lettere adgang

Back-cut nåledesign giver **optimal hud – og venepunktur**, der øger patientkomforten.

3. Specielt kanylemateriale

BD Vialon™ biomaterialets kinkresistente egenskab blødgør kateteret i venen, **øger brugstiden af kateteret og giver et minimum af genanlæggelser**.^{1,2*}

4. Behagelig fiksering

Fleksible vinger stabiliserer kanylen i venen og giver en **komfortabel fiksering** for patienten.

5. Passiv sikkerhedsmekanisme

Et glat plasticskjold indkapsler fuldstændigt nålespidsen og giver hermed en **forbedret beskyttelse mod stikskader**. Designet til at beskytte mod uventede blodstænk.

6. Portdesign

Velkendt portdesign med 'klik'-hætte, **der hjælper ved non-touch-teknikker** og forebygger, at porten åbnes utilsigtet.

7. Ergonomisk anlæggelse

Ergonomisk design, der hjælper ved anlæggelsen og tillader anvendelse af **forskellige anlæggelsesteknikker**.

8. Kan tilpasses specielle behov

Aftagelig hvid prop giver **fleksibilitet** til specielle behov.


1.





2.



3.

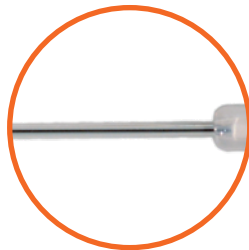


4.

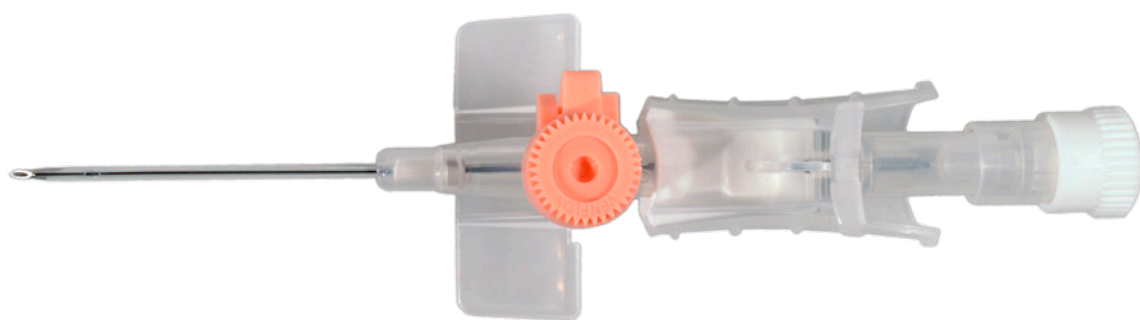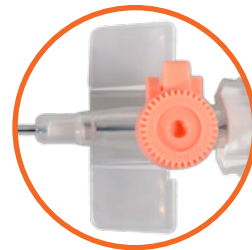

5.



6.

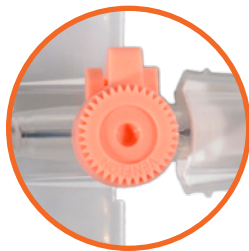

7.



8.



BD Venflon Pro Safety IV-kateter med sikkerhedsmekanisme og BD Instaflash nåleteknologi

BD Varenr.	Størrelse	Farve	Kateterspecifikationer ³				Enhed per æske/karton
			Længde (mm)	Ydre diameter (mm)	Indre diameter (mm)	Flow rate H ₂ O mL/min	
393280	22 G	Blå	25	0,9	0,6	42	50/500
393281	20 G	Pink	32	1,1	0,8	67	50/500
393282	18 G	Grøn	32	1,3	1,0	103	50/500
393283	18 G	Grøn	45	1,3	1,0	103	50/500

*Sammenlignet med FEP-kateter

Referencer

1. Maki DG, Ringer M. Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous catheters. *Ann Intern Med.* 1991;114(10):845-854.
2. BD, data on file 0000MS07610. 23 November 2016.
3. BD, data on file 0000MS08043. January 2018.

BD A/S • Firskovvej 25 B • 2800 Lyngby • bddenmark@bd.com • Tlf: +45 43 434566 • bd.com/dk

bd.com

