


Suprasorb® P + PHMB

Antimikrobiel PU-skumforbinding

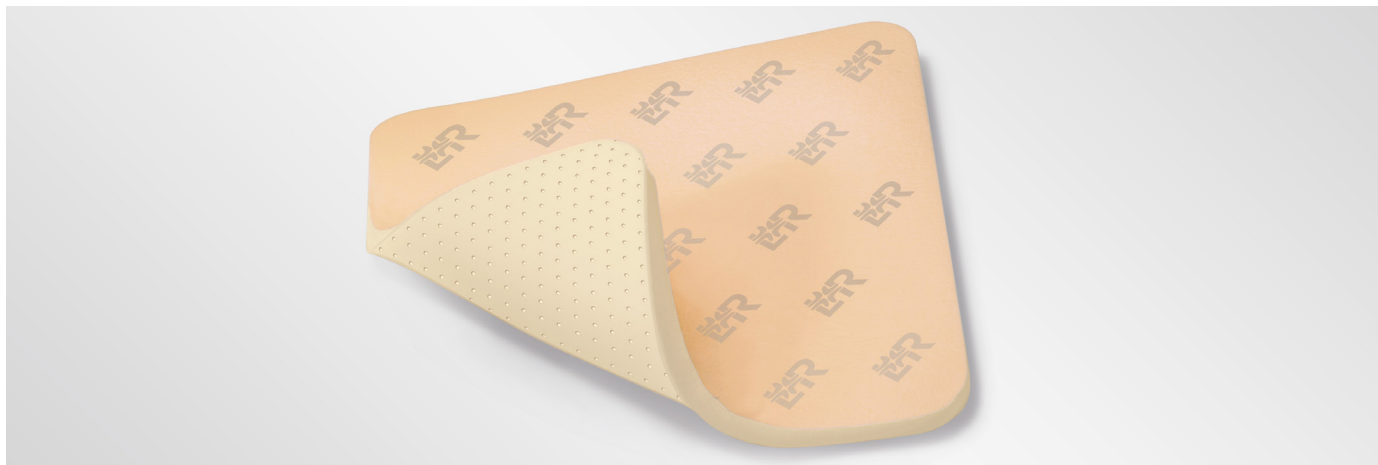

Suprasorb P + PHMB med perforeret sårkontaktlag imponerer med sin pålidelige absorption af eksudat. PHMB, der er indarbejdet i skummet, er effektivt både i forbindingen og i såret. Derfor er Suprasorb P + PHMB klassificeret som et klasse III medicinsk udstyr.

Materialet er blødt og komfortabelt. Den specielle overfladestruktur på Suprasorb P + PHMB sårlaget er

skånsom mod let beskadigede overflader som helende sår. Den semipermeable PU-bærerlag opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø. Ugennemtrængelig for bakterier og vand.

Suprasorb P + PHMB er kan anvendes til brug under kompressionsbandager.

Anvendelse

- Til moderat til kraftigt væskende sår
- Til sår der er inficerede og i risiko for infektion
- Til overfladiske sår

Sårhelings stadier:

- Eksudationsfase
- Granuleringsfase
- Epitelialiseringsfase

Egenskaber

- Pålidelig håndtering af eksudat
- Bred antimikrobiel effekt
- Hurtig og langvarig effekt
- Med en perforeret sårkontaktlag
- Vand- og bakterietæt

Dimensioner (cm)	REF
5 x 5	34 540
7.5 x 7.5	34 541
10 x 10	34 542
10 x 20	34 543
15 x 15	34 544
20 x 20	34 545