


Dokumenteret og effektiv beskyttelse

1. Jackie Denyer, EB clinical nurse specialist, UK: The use of novel bi-stretch silicone dressing in the management of children with EB.
2. Jane Clapham, Lead EB CNS, Chris Bloor EB CNS, UK: Use of Spycra Protect in Epidermolysis Bullosa.
3. Deborah Simon, Tissue Viability Lead, UK: An clinical evaluation of Spycra Protect silicone dressing in protecting fragile skin.
4. Anne Wilson, Tissue Viability Nurse Specialist; Angela Rogers, Pediatric Tissue Viability Nurse Specialist; Aileen Armour, Charge Nurse, intensive care unit, UK: Prevention of device-related pressure ulcers.

Spycra Protect, steril

Vare nr.	Størrelse	Antal/æske
SDSC-575	5 x 7,5 cm	10 stk
SDSC-7510	7,5 x 10 cm	10 stk
SDSC-1018	10 x 18 cm	5 stk
SDSC-1830	18 x 30 cm	3 stk
SDSC-5150	5 x 150 cm	1 stk

Enkeltpakket og steril. Medicinsk udstyr, klasse 2b.
Opbevares tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.
Holdbarhed 5 år efter produktionsdato.

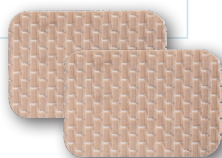

02/19



Producent:
Reskin Medical N.V.
+32 (0)13 35 36 24
info@reskin.eu



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk



Spycra Protect®

OPTIMAL BESKYTTELSE AF SKRØBELIG OG UDSAT HUD




ÅNDBAR • BI-ELASTISK • ATRAUMATISK

SPYCRA® Protect

Produktinformation

Lycra

- bi-elastisk
- åndbar

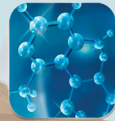

Silikoneklæber

- hudvenlig
- atraumatisk

Beskyttelsespapir

- optimal frigørelse

Spycra Protect's yderside består af lycra (polyester og elastan), hvilket giver materialet en glat silkelignende overflade.

Materialet er vævet i en åben struktur, der sikrer høj åndbarhed.

Forbindingen kan strækkes i 2 retninger, hhv. i længden og i bredden.

Bi-elasticiteten sikrer høj fleksibilitet, forbindingen er let at applicere, former sig efter kroppens konturer og følger hudens bevægelser.

Friktion og shear-kræfter nedsættes og sekundær hudskade minimeres.

Spycra Protect har en blød silikoneklæber, der sikrer, at forbindingen kan fjernes atraumatisk og smertefrit, samt genplaceres.

Forbindingen er tynd, blød og meget fleksibel og forbliver på plads, uden at rulle i kanterne.

Er særligt velegnet over led og på svært bandagérbare steder, såsom armhuler, under brystet, i lysken etc.

På intakt hud kan Spycra Protect anvendes i op til 7 dage.

Over sår og vabler skiftes efter behov, samt efter hudens og sårets tilstand.

Indikationer for forebyggende anvendelse

Beskyttelse af aldrende, tynd og skrøbelig hud.

Beskyttelse af huden ved risiko for friktion, fx. ved sengeleje og proteser, samt ved Epidermolysis Bullosa.

Beskyttelse af hud over trykudsatte områder, såsom knoglefremspring, ved tuber og masker etc.

Beskyttelse af huden ved ophelet sår, samt arbejdning.

Forebyggelse af kradssår ved kløende og irriteret hud.

Som fikseringstape ved kanyler, infusion etc. på særlig sart og skrøbelig hud.

Beskyttelse af huden ved intertrigo samt som forebyggelse heraf ved hud-mod-hud kontakt, i hudfolder eller ved anden risiko for udvikling af inflammation i huden.

Indikationer for behandlende anvendelse

Skin tears klasse 1 og 2a.

Overfladiske sår uden eller med let sekretion.

Kradssår.

Over vabler og små sår ved Epidermolysis Bullosa.

Kontraindikationer: Ved infektion i sår og/eller hud.
Læs endvidere indlægssedlen i pakningen.

