


## Bandage med hæmostatisk effekt<sup>1</sup>



KALTOSTAT er en alginat bandage, som kan anvendes til moderat og kraftigt væskende sår. KALTOSTAT appliceres på såret og dækkes med en fugtbevarende bandage, f.eks. DuoDERM® Extra Thin eller DuoDERM® Signal™. Bandagen har en hæmostatisk effekt<sup>1</sup>, hvilket indebærer, at den med fordel kan anvendes på letblødende sår eller donorsteder. KALTOSTAT findes også som cavitetsbandage, hvilket letter appliceringen i sårhuler. Bandagen er let at anvende, blød, smidig og giver en høj patientkomfort.

# KALTOSTAT®

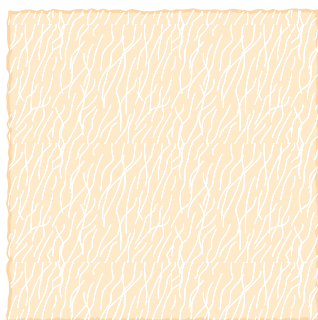

**NATURLIG SÅRHELING**  
80% kalcium-alginat og  
20% natrium-alginat

**SKÅNSOM SÅRHELING**  
Fibrene omdannes til en  
blød gel, som fremmer  
sårhelingen.

## BEVARER ET FUGTIGT SÅRHELINGSMILJØ

KALTOSTAT bevarer fugten i såret og kan fjernes let. KALTOSTAT findes både som "bandager" i 4 forskellige størrelser og som cavitetsbandage, som letter appliceringen af bandagen i sårhuler.

## BEHAGELIG FOR PATIENTEN

KALTOSTAT består af 80% kalcium-alginat og 20% natrium-alginat og er et rent naturprodukt. Når KALTOSTAT kommer i kontakt med sårsekret eller blod, omdannes alginatet til en blød gel. I denne process binder absorberer materialet store mængder væske.

## HAR EN HÆMOSTATISK EFFEKT <sup>1</sup>

Ved kontakt med blod har KALTOSTAT en hæmostatisk effekt, hvilket indebærer, at den med fordel kan anvendes på letblødende sår eller f.eks. donorsteder.

## FAKTA

### KALTOSTAT®

KALTOSTAT er en hvid, blød og steril non-woven bandage, bestående af kalcium-natrium alginatfibre. Alginatfibrene absorberer såreksudatet og omdanner dette til en sammenhængende gel. Gelen skaber et fugtigt sårhelingsmiljø. Bandagen kan let fjernes fra såret.

### INDIKATIONER

KALTOSTAT kan anvendes til moderat til kraftigt væskende sår, f.eks. tryksår, venøse og arterielle bensår, diabetes-sår, donorsteder, hudafskrabbninger, rifter, mindre brandsår, kirurgiske sår, postoperative og traumatiske sår. KALTOSTAT kan anvendes på inficerede sår under lægetilsyn.

### SKIFTEFREKVENNS

Bandagen skiftes, når den er mættet, dog max efter 7 dage.

### OPBEVARING

Opbevares tørt i stuetemperatur. Undgå stærkt lys.

### STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

### KLASSIFICERING

KALTOSTAT er CE-mærket og opfylder alle relevante miljø- og sikkerhedskrav.

### HOLDBARHED

3 år.

For yderligere information, læs brugsanvisningen i æsken.

## KALTOSTAT®

Størrelse	Stk./æske	Varenr.
5 x 5 cm	10 stk.	168210
7,5 x 12 cm	10 stk.	168212
10 x 20 cm	10 stk.	168214
15 x 25 cm	10 stk.	168215

## KALTOSTAT CAVITETSBÅND

2 gram	5 stk.	168117
--------	--------	--------



**ConvaTec**

*Realize the possibilities™*

ConvaTec Denmark Aps,  
Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød,  
kundeservice: 45 87 60 11,  
www.convatec.dk,  
convatec.danmark@convatec.com