

NY ALLEVYN LIFE: forbedret maskeringslag og sårkontaktlag for bedre sårbehandling

www.closetozero.com

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®] LIFE
Foam Dressing



Supporting healthcare professionals

ALLEVYN LIFE har et unikt design med fem lag, fås i et udvalg af forskellige bandagestørrelser og -former og er designet til at give patienten et bedre velbefindende.


Åndbar topfilm der
tåler brusebad

Indbygget
maskeringslag

Højabsorberende
indkapslingslag som
forebygger lækage³

Hydrocellulært skum

Sårkontaktlag
med silikone

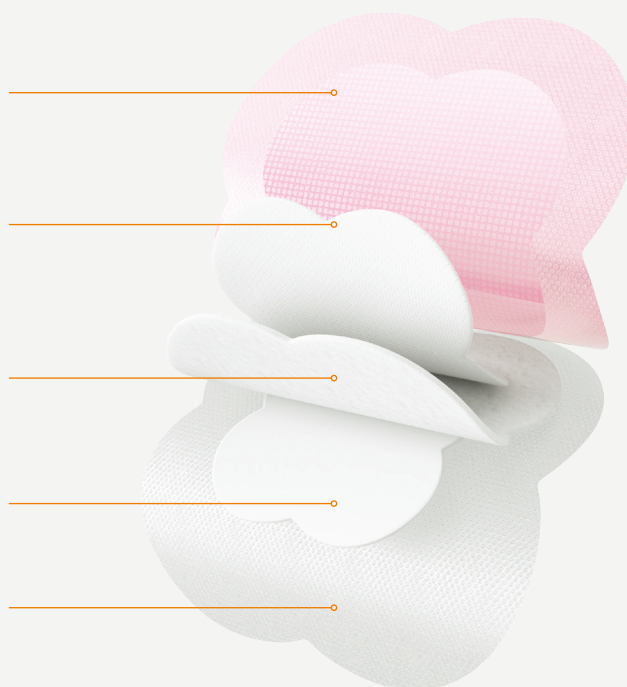

Firkløverformen med en bred klæbekant hjælper med at sikre, at ALLEVYN LIFE bliver siddende på kroppen, også når man tager brusebad¹



Det beskyttende maskeringslag gør, at gennemtrængende sårveske ses mindre (*in vitro*), hvilket bevirker at patienten dermed føler sig mere tryk⁴



Indkapslingslaget minimerer risikoen for, at der løber væske ud, og det giver patienten ro i sindet³




Det polstrende lag er med til at give såret den bedst mulige beskyttelse mod stød i dagligdagen⁵



Det skånsomme silikoneklæbemiddel gør det nemt at anlægge, fjerne og omplacere bandagen og samtidig sikre patientens velbefindende, mens bandagen er på, og når den tages af^{1,6}

ALLEVYN LIFE er designet med input fra både patienter og klinikere rundt om i verden for at skabe et produkt, der giver den bedste oplevelse med sårbehandling.

Slagelse og Århus Kommune har evalueret ALLEVYN LIFE (N=22)²

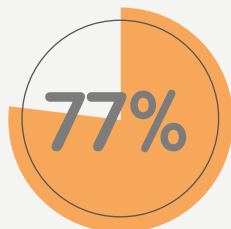

af klinikerne anbefaler at anvende ALLEVYN LIFE vs. tidligere anvendte bandage

5 ud af 6 klinikere i Slagelse og Århus Kommune vurderer ALLEVYN LIFE som værende "Udmærket" eller "God" på følgende punkter:²



Indikerer hvornår bandagen skal skiftes




Bliver siddende på plads



Former sig efter kroppen

Skifteindikatoren gør det muligt at reducere frekvensen af bandageskift.


Med en visuel guide til, hvornår bandagen skal skiftes, undgås unødige bandageskift⁷

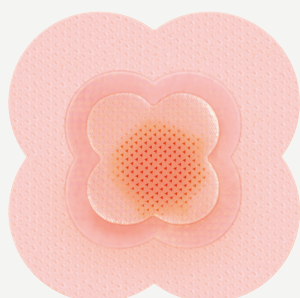

Ingen synlig sårvæske uden for maskeringslaget
Bandagen skal ikke skiftes



50% synlig sårvæske uden for maskeringslaget
Overvej bandageskift

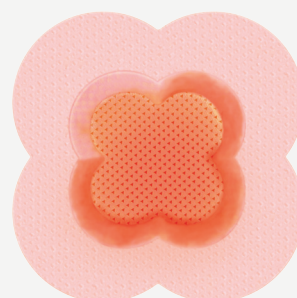

75% synlig sårvæske uden for maskeringslaget
Bandagen skal skiftes

ALLEVYN LIFE fås også i specialdesignede former til sakralområde og hæl



ALLEVYN
LIFE



ALLEVYN
LIFE Hæl



ALLEVYN
LIFE Sacrum

Produktoversigt

Varenummer	Bandagens størrelse (cm)	Antal pr æske
ALLEVYN LIFE		
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	10
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	10
66801069	15,4 cm x 15,4 cm	10
66801070	21 cm x 21 cm	10
66801304 Hæl	25 cm x 25,2 cm	5
66801306 Sacrum, lille	17,2 cm x 17,5 cm	10
66801307 Sacrum, stor	21,6 cm x 23 cm	10

Wound Management
Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
T 45 80 61 00
F 45 80 61 51

www.smith-nephew.dk

©Varemærke tilhørende Smith & Nephew
All Trademarks acknowledged
©May 2017 Smith & Nephew
17-05708-DK

Supporting healthcare professionals for over 150 years

Referencer 1. Rossington A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wounds UK 2013;9(4):91-95. Data on file report TWI41-198-Bacterial barrier wet/wet test 2. DOF 2016, Evaluering i Slagelse og Århus Kommune 2015. 3. Smith & Nephew Data on file report: DS/12/130/DOF. Simulated wound model testing of ALLEVYN LIFE and MepilexT Border. 4. Smith & Nephew Data on file report: DS/12/129/DOF. Simulated wound model testing of ALLEVYN LIFE and MepilexT Border. 5. Smith & Nephew Data on file report: DS/12/185/DOF. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexT Border and BiatainT Silicone. 6. Smith & Nephew Data on file report: OR DOF020. Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and MepilexT Border. 7. Stephen-Haynes J et al. An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013.