


Suprasorb® F- Folie-sårforbinding

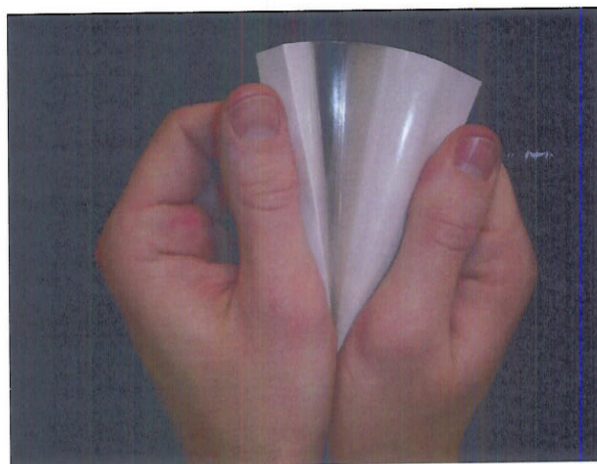

Suprasorb folie-sårforbinding som tillader løbende kontrol af såret. Ugennemtrængelig for bakterier. Optimal vanddamp-permeabilitet.

Produktet:

Polyurethanfilm. Elastisk og smidig som huden. Tynd som hud og gennemsigtig. Med polyacrylatlæber og derfor speciel hudvenlig.

Suprasorb F er uigennemtrængelig for bakterier. Hudens fugtighedsafsondring foregår uhindret på grund af membranens særlige vanddamp-permeabilitet.

Er let at anlægge da forbindingen stabiliseres ved et nyudviklet applikationssystem.

Suprasorb F er enkeltvis indpakket og strålesteriliseret.

Lohmann & Rauscher A/S
Gøngehusvej 252
DK 2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 02 25
Fax 45 89 02 29
email info@dk.Lrmed.com

Anvendelsesområde:

Den sterile Suprasorb F er velegnet til post-operativ sårafdækning; til aseptiske, overfladiske sår, til afdækning af donorsteder efter omhyggelig blodstandsning og til afdækning af lette I. og II. grads forbrændninger. Folie-sårforbinding kontraindiceret ved blødende, stærkt sekreterende såvel som inficerede sår.

Suprasorb F applikeres på tør hud. De tre mindste størrelser har applikationsfilm, der hjælper til enkel, glat og sikker fiksering. Den hudtynde elastiske folie forhindrer indtrængen af bakterier. Den beskytter såret og muliggør bevægelser. Ideel til badning, bruse- eller karbad. God hæfteevne og umiddelbar kontrol af sårområdet uden forbindingsskift gør det muligt at lade forbindingen sidde gennem længere tid. Det fysiologiske sårhelingsmiljø optimeres. Suprasorb F kan sidde i op til 7 dage alt efter hvad såret tillader.

Sortiment:

Suprasorb F

steril,
enkeltvis indpakket

klæbeflade	æsker á	art.
5 x 7 cm	10 stk	20460
5 x 7 cm	100 stk	20461
10 x 12cm	10 stk	20462
10 x 12cm	50 stk	20463
10 x 25 cm	10 stk	20464
15 x 20 cm	10 stk	20465
20 x 30 cm	10 stk	20466