

# Tubifast® 2-Way Stretch®


Tubebandage af høj kvalitet,  
som giver brugerne  
fuld bevægelsesfrihed

2-Way Stretch® teknologien  
gør det muligt for bandagen  
at forme sig efter forskellige  
dele af kroppen

Kan vaskes og genbruges

Intet behov for strips eller tape

Let at bruge: kan klippes til i  
den ønskede længde

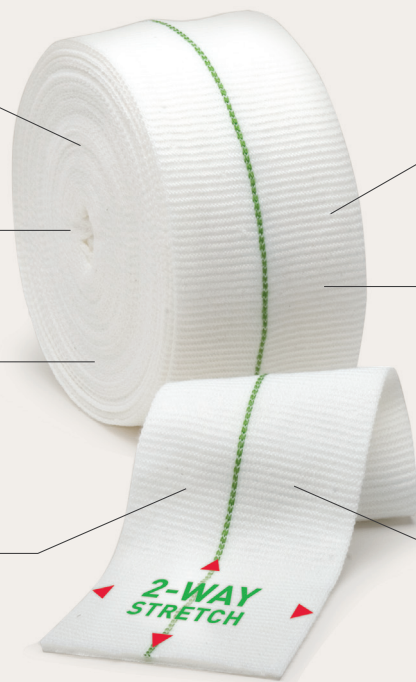

Latexfri


Let elasticitet i både lodret og  
vandret retning  
giver brugerne fuld  
bevægelsesfrihed<sup>1</sup>

Fås i 5 farvekodede størrelser,  
der passer til alle dele af kroppen


Tubifast® 2-Way Stretch®  
tubebandage er designet til fiksering  
af bandager, til tør og våd tildækning  
("patch wrapping") og til brug under  
gips. Tubifast 2-Way Stretch kan også  
bruges til beskyttelse af huden på  
alle dele af kroppen og til behandling  
af Epidermolysis Bullosa<sup>2</sup>.

- Giver fuld bevægelsesfrihed
- Forbliver sikkert på plads uden brug af sikkerhedsnåle eller tape
- Kan genbruges efter vask


# Sådan anvendes Tubifast® 2-Way Stretch®

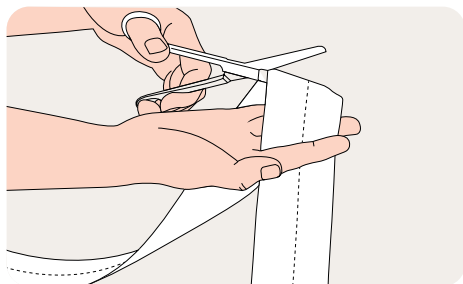

1. Vælg den rette tubebredde ved hjælp af farvetråden, og klip den til i den ønskede længde.

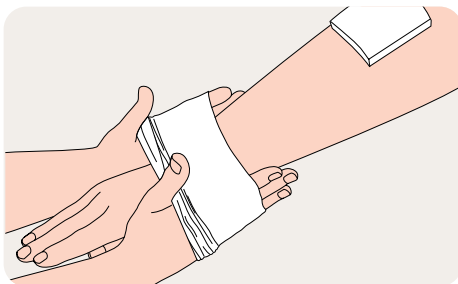

2. Træk Tubifast® 2-Way Stretch® over det berørte område.

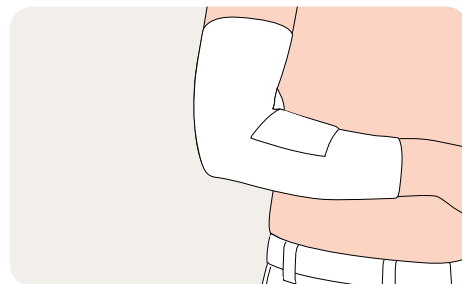

3. Placér Tubifast 2-Way Stretch, så den dækker bandagen. Se appliceringsguide for flere avancerede appliceringer.

## Sådan virker Tubifast® 2-Way Stretch®

Tubifast 2-Way Stretch behøver ingen sikkerhedsnåle eller tape for at blive på plads, og dens tubulære konstruktion tillader luft at cirkulere over huden. Tubifast 2-Way Stretch giver en let elasticitet i både lodret og vandret retning, hvilket giver patienterne fuld bevægelsesfrihed.

## Fordele ved Tubifast 2-Way Stretch

- Former sig efter kroppens konturer takket været 2-Way Stretch® teknologi
- Giver fuld bevægelsesfrihed
- Let at bruge: kan klippes til den ønskede længde
- Forbliver sikkert på plads uden brug af sikkerhedsnåle eller tape
- Latexfri, ikke-sensibiliserende og ikke-irriterende
- Kan genbruges efter vask
- Fås i 5 farvekodede størrelser, der passer til alle dele af kroppen

## Anvendelsesområde

Tubifast 2-Way Stretch tubebandage er designet til fiksering af bandager uden brug af sikkerhedsnåle eller tape. Den er særligt velegnet til fiksering på vanskelige områder som f.eks. amputationsstumper.

Produktet er også designet til våd og tør tildækning (wrapping) og til brug under gips. Tubifast 2-Way Stretch kan også bruges til beskyttelse af huden på alle dele af kroppen og til behandling af Epidermolysis Bullosa<sup>2</sup>.

## Vaskeinstruktioner



## Fiberindhold

Viskose, elastan og polyamid.



## Tubifast 2-Way Stretch ordering information

Produkt	Bredde x længde	Omkreds	Varenr.	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt
<b>RØD</b>	3,5cm x 1m	9-18cm	2480	12	36
Små ekstremiteter	3,5cm x 10m	9-18cm	2434	1	20
<b>GRØN</b>	5cm x 1m	14-24cm	2481	12	36
Små- og mellemstore ekstremiteter	5cm x 10m	14-24cm	2436	1	24
<b>BLÅ</b>	7,5cm x 1m	24-40cm	2482	12	36
Store ekstremiteter	7,5cm x 10m	24-40cm	2438	1	30
<b>GUL</b>	10,75cm x 1m	35-64cm	2483	12	36
Ekstra store ekstremiteter, hoved, helkrop til voksne	10,75cm x 10m	35-64cm	2440	1	12
<b>LILLA</b>	20cm x 1m	64-130cm	2479	12	48
Stor helkrop, voksne	20cm x 10m	64-130cm	2444	1	15

Tubifast 2-Way Stretch er pakket i enkeltpakninger

Referencer: 1. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a 2-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. Journal des plaies et cicatrisations 2013;18(88):38-44.  
2. Mölnlycke Health Care. Data on file.

## Læs mere på molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com  
Mölnlycke, Tubifast og 2-Way Stretch varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2025 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC3152503

