


Curapor®-sårforbinding transparent

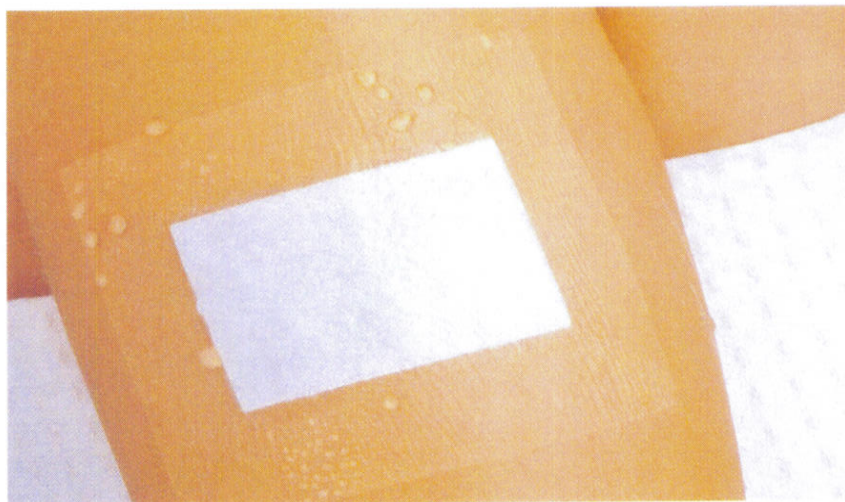

Produktet:

100% polyrethan transparent folie med hudvenlig polyacrylatklæbemasse

Sårpudden har et absorberende lag af viskose/polyester og et ikke klæbende polyester/polyethylen lag. Klæber ikke til såret.

Filmen er semipermeabel; og der opnås god luft- og vanddampgennemtrængelighed.

Sårsekret optages straks i kompressets absorberende lag, hvorved sårrensningen intensiveres

Anvendelsesområde:

Curapor transparent er velegnet til steril primærpleje og til forbindingsskift ved alle typer sår.

Da sårkompresset ikke klæber til såret, er forbindingsskift smertefrit og skånsomt. Helingsprocessen påvirkes positivt.

Curapor transparent kan sidde lige så længe behovet er der.

Patienten kan bade med Curapor transparent

Sortiment:

Curapor- transparent

steril,
enkeltvis indpakket

<u>æsker á 50 stk.</u>	<u>art.nr.</u>
7 x 5,0 cm	13101

<u>Æsker á 25 stk.</u>	<u>art.nr.</u>
10 x 8 cm	13102
10 x 15 cm	13103
10 x 20 cm	13104
10 x 25 cm	13105

<u>Æsker á 5 stk.</u>	<u>art.nr.</u>
7 x 5 cm	13099
10 x 8 cm	13100