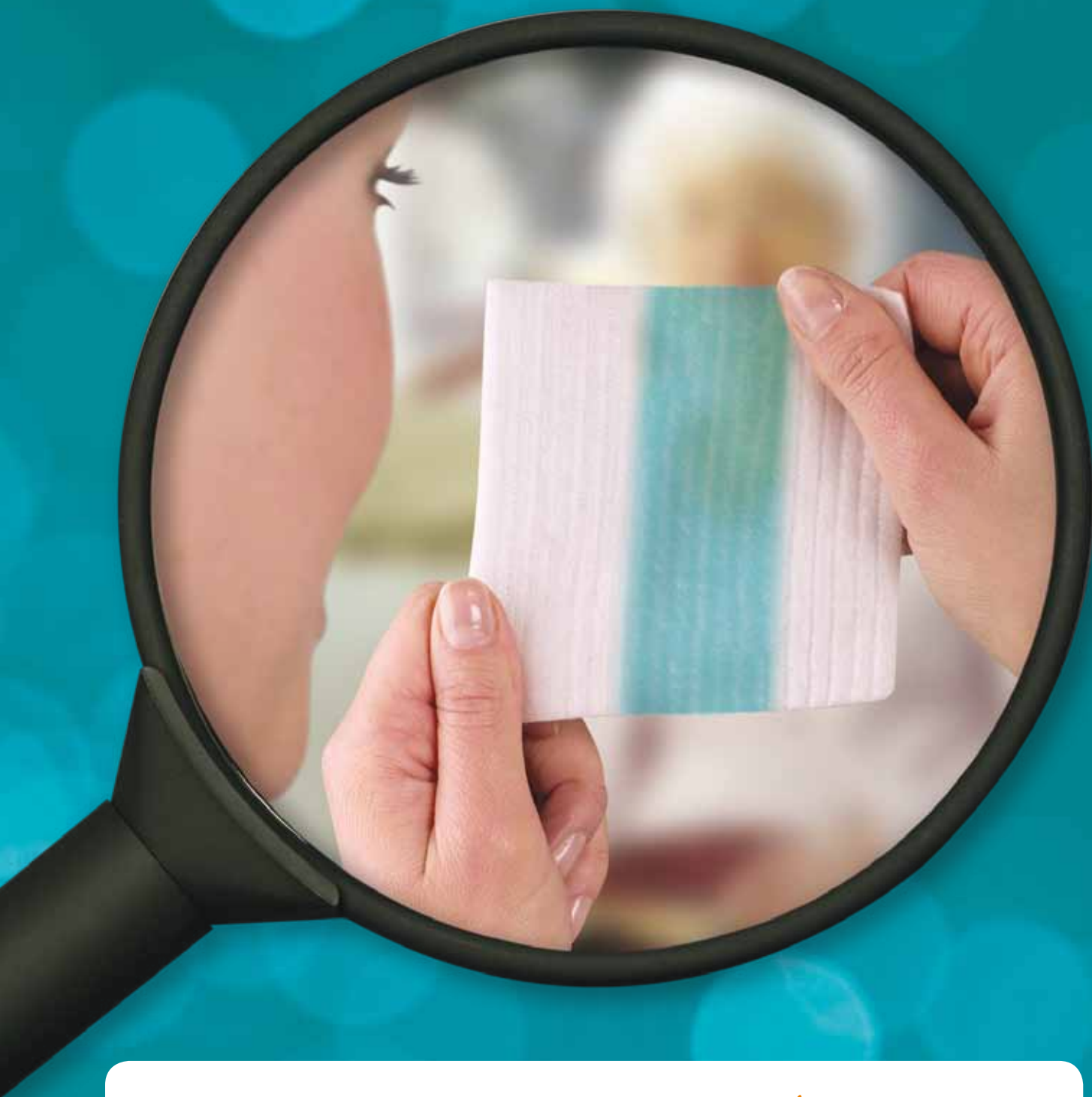




DURAFIBER

En stærk gelfiberbandage der nemt
kan fjernes sammenhængende¹

 **smith&nephew**
DURAFIBER[®]
Gelling Fibre Dressing

DURAFIBER[®]

DURAFIBER er en højabsorberende, 100 % nonwoven gelfiberbandage. DURAFIBER er sammensat blanding af specielt modificerede cellulosefibre. Med DURAFIBER tilbydes en alsidig løsning til håndtering af moderat til stærkt væskende sår.



1 Blødt sammenhængende gellag¹

Danner et blødt sammenhængende gellag ved kontakt med sår væske.

- Former sig tæt til sår bunden.²
- Danner et optimalt fugtigt sår miljø.
- Reducerer hulrum, hvor bakterier kan formere sig.³

2 Binder væske og isolerer bakterier^{1, 2, 4, 5}

Bandagens fibre svulmer op og gelaterer, når sår væske absorberes, og binder dermed væske og isolerer eventuelle bakterier.^{1, 2, 4, 5}

- Fjerner overskydende væske og bakterier fra sår bunden.^{1, 2, 4, 5}
- Minimerer risikoen for maceration af omkringliggende hud.⁵
- Nedsætter risikoen for krydskontamination ved bandageskift.^{1, 2, 4}

Vertikal absorption og kontrolleret lateral spredning^{2, 5}

Den væskebindende funktion kontrollerer effektivt lateral spredning, ved vertikal absorption af væske.^{2, 5}

- ## 3
- Minimerer risikoen for maceration omkring såret og fremmer dermed helingen.

4 Bevarer form og gelstyrke^{1, 2}

- Forbliver intakt i våd tilstand, og gør det nemt at fjerne den sammenhængende.^{1, 2}
- Nedsætter risikoen for bandagerester i såret.^{1, 2}
- Muliggør hurtigere og mere behageligt bandageskift.

5 Høj absorptionskapacitet^{1, 2}

- Optimal væskehåndtering.^{1, 2, 6}
- Nedsætter risikoen for lækage og forbedrer dermed patientkomforten.
- Bæretid op til 7 dage.

6 Minimal bandagekrumpning¹

- Opretholder sår tildækningen.^{1, 2, 3}
- Effektiv væskehåndtering af hele sår bunden.
- Høj udnyttelsesgrad med færre bandageskift.

Hvordan virker DURAFIBER?



Før applicering.



Sår væske.



Lukker sår væske inde og isolerer eventuelle bakterier.

Indikationer:

DURAFIBER er velegnet til behandling af kroniske og akutte væskende sår, dybe til overfladiske granulerende, til alle typer væskende sår, f. eks. bensår tryksår, diabetessår, kirurgiske sår, sår med sekundær heling, donorsteder, kaviteter og fistler, partielle dybe brandsår, sår efter ulykker og sår, der er tilbøjelige til at bløde.

Applicering:

Læg DURAFIBER på såret med ca 1 cm overlap på hudoverfladen omkring såret. Fiksér DURAFIBER med en fugtbevarende bandage (f. eks. ALLEVYN/OPSITE). Ved brug af DURAFIBER filler i dybe kavitetsår, appliceres filleren i ét stykke, med mindst 2,5 cm overlap uden for såret, så filleren er nem af fjerne sammenhængende. Dybe sår må kun pakkes til omkring 85%, idet DURAFIBER bandagens fibre udvider sig ved kontakt med sår væske.

DURAFIBER[®] Stærk gelfiberbandage



Smith & Nephew
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
Tlf. 45 80 61 00
Fax 45 80 61 51
sn.dk@smith-nephew.com

[®]Varemærke, tilhørende Smith & Nephew
[°] Alle varemærker godkendt
© Smith & Nephew Oktober 2012

www.smith-nephew.com/wound 21930

Produktsortiment

Varenr.	Bandage	Størrelse	Antal/æske
66800559		5cm x 5cm	10
66800560		10cm x 10cm	10
66800561		15cm x 15cm	5
66800551		10cm x 12cm	10
66800546		4cm x 10cm	5
66800547		4cm x 20cm	5
66800548		4cm x 30cm	5
66800563		2cm x 45cm	5

Referencer:

Alle referencer er in vitro tests (ekskl. ref. 7)
1. Smith and Nephew Report – DS/10.056.R1 05 2010 DURAFIBER[®] Dressing Physical Properties
2. DS/11/187/DOF Testing performed as part of DURAFIBER[®] photoshoot
3. Smith and Nephew Research Centre Review Report: RR-WMP06290-40-01 The potential for proliferation of bacteria in wound exudate aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER[®] dressing using confocal microscopy
4. Smith and Nephew Wound Management Data on File 1004001 April 2010 Visual Demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER[®] dressing using confocal microscopy
5. Smith and Nephew Report – DS/10/042R1 Report of testing on lateral wicking of DURAFIBER[®] versus Aquacel[®] and Kaltostat[®] dressings
6. Smith and Nephew Report – DS/10/013/R1 02 2010 Aquacel[®] Dressing Physical Properties
7. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Wound exudate and the role of dressings. A consensus document. London: MED Ltd, 2007.