

SORBACT®

GRØN SÅRHELING

Sorbact®-metoden er en innovativ metode til at reducere den mikrobiologiske belastning i sår uden brug af kemisk aktive stoffer. Med en naturlig virkningsmekanisme binder Sorbact® bakterier og svampe til sig.

Sorbact®-metoden er en svensk innovation. Den er baseret på viden om, at to hydrofobe (vandafvisende) partikler binder sig til hinanden i fugtige miljøer. Almindelige patogene mikroorganismer som *Staphylococcus aureus*, *Streptokokstammer*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* og *Candida albicans* er hydrofobe og binder sig derfor til den unikke, grønne overflade på Sorbact®. De fjernes fra såret, hver gang bandagen skiftes.

EFFEKTIV MOD MULTIRESENTENTE BAKTERIER

Bekæmpelse af multiresistente bakterier har fået større og større betydning ved sårbehandling og i hospitalets rutiner. Sorbact®-metoden er også effektiv mod MRSA (methicillin-resistent Staph. aureus), da deres resistens over for antibiotika ikke ændrer de hydrofobe egenskaber eller evnen til at binde sig til Sorbact®. Resistens over for Sorbact®-metoden er ikke beskrevet.


Via vores partnere og forhandlere anvendes Sorbact® til behandling af mange forskellige sårtyper i mere end 65 lande på alle kontinenter.



1 **Reduceret mikrobiel belastning i et sår kan medvirke til at fremme heling. Sorbact® skal lægges direkte på såret.**



2 **Sorbact® lægges direkte på såret, hvor mikroorganismer på grund af fugten binder sig til bandagen.**

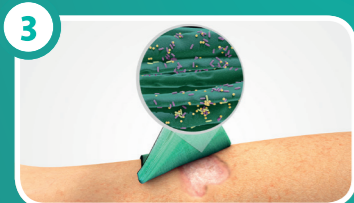

3 **Bandagen skiftes og fjerner samtidig de bakterier og svampe, der har bundet sig til bandagen. Når antallet af mikroorganismer falder til et niveau, som kroppen kan kontrollere, fremmes sårhelingen.**

SORBACT®

PRODUKTSORTIMENT



SORBACT® GEL DRESSING GELKOMPRES

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98139	3x15 cm	10	98137	7,5x15 cm	10
98136	7,5x7,5 cm	10			



SORBACT® COMPRESS KOMPRES

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98128	4x6 cm	40	98125	7x9 cm	40



SORBACT® SURGICAL DRESSING KIRURGISK BANDAGE

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98140	5x7,2 cm	100	98144	10x25 cm	20
98141	8x10 cm	20	98145	10x30 cm	20
98142	8x15 cm	20	98146	10x35 cm	20
98143	10x20 cm	20			



SORBACT® FOAM GENTLE BORDER SKUMBANDAGE MED SILIKONEKANT

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98531	7,5x7,5 cm	10	98533	15x15 cm	10
98532	10x10 cm	10			



SORBACT® RIBBON GAUZE MECHE

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98118	1x50 cm	20	98120	5x200 cm	10
98121	2x50 cm	20	98119	10x200 cm	10



SORBACT® ROUND SWAB GAZEVISKER

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98126	Ø 3 cm	70 (5 x 14)



SORBACT® FOAM DRESSING SKUMBANDAGE

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98310	10x10 cm	10	98320	10x20 cm	10
98315	15x15 cm	10			



SORBACT® ABSORPTION DRESSING ABSORPTIONSBANDAGE

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98224	7x9 cm	20	98223	10 x 20 cm	10
98222	10x10 cm	20			



SORBACT® SUPERABSORBENT SUPERABSORBANT


Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98501	10x10 cm	10	98503	20x20 cm	10
98502	10x20 cm	10	98504	20x30 cm	10



SORBACT® NPWT WOUND FILLER NPWT SÅRFYLDNINGSMATERIALE

Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke	Varenr.	Størrelse	stk. pr. pakke
98425	17x28 cm	40	98410	10x100 cm	10

Sorbact® er et registreret varemærke tilhørende ABICO Medical AB
2015-43

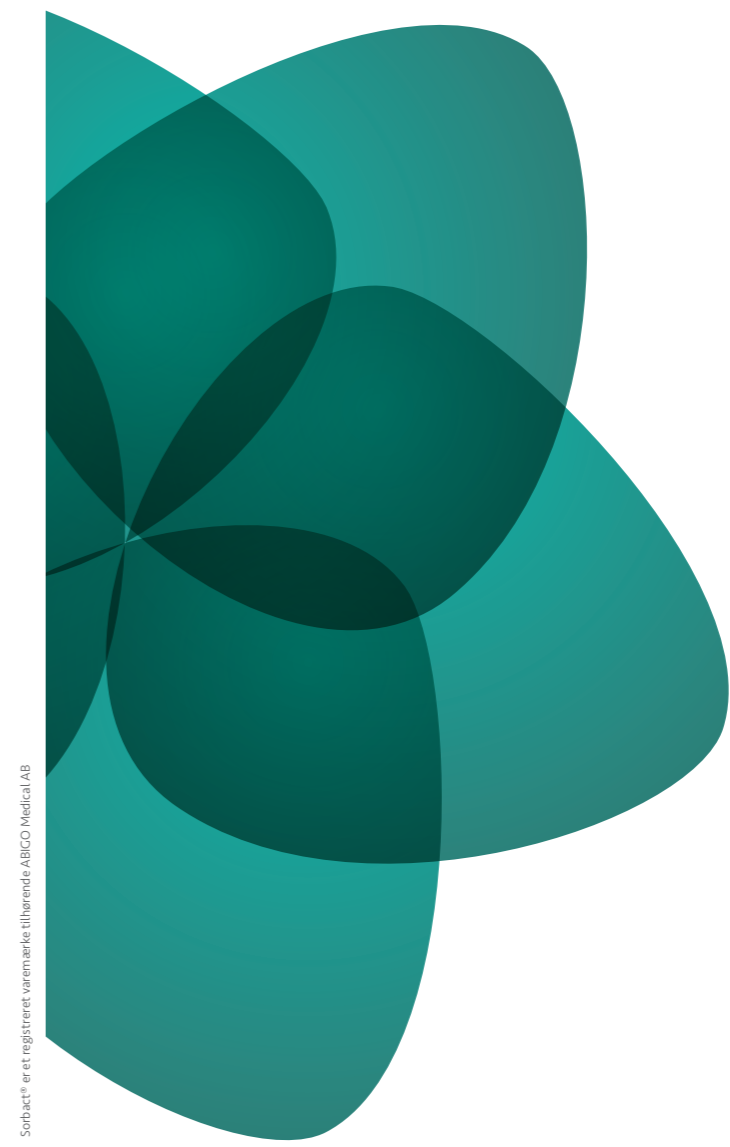

ABIGO Pharma A/S
www.abigo.dk · info@abigo.dk






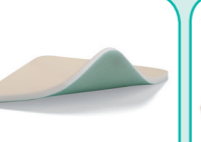



















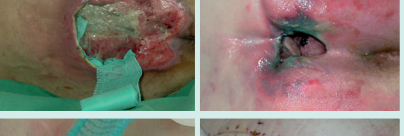

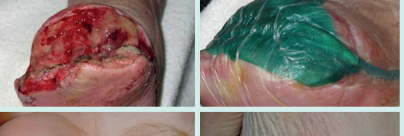














SORBACT®

BRUGERVEJLEDNING

Sorbact® er velegnet til alle typer sår og kan anvendes i alle stadier af sårheling for at reducere den mikrobielle belastning og til håndtering af bakterie- og svampeinfektioner. Anvendes også til svampeinfektioner i hudfolder.

Sorbact® fås i mange forskellige former og størrelser. Vælg bandage efter sårtype, eksudatniveau og sår dybde.

		SORBACT® GEL DRESSING	SORBACT® COMPRESS	SORBACT® SURGICAL DRESSING	SORBACT® RIBBON GAUZE	SORBACT® ROUND SWAB	SORBACT® FOAM DRESSING	SORBACT® FOAM GENTLE BORDER	SORBACT® ABSORPTION DRESSING	SORBACT® SUPER- ABSORBENT	SORBACT® NPWT WOUND FILLER
											
											
		Anvendelsesområder Til tørre sår og brandsår med lavt eksudatniveau. Tilfører fugt.	Anvendelsesområder Til overfladiske kavitetssår og svampeinfektioner i hudfolder.	Anvendelsesområder Til infektionskontrol ved postoperative sår og traumesår. Vandskyende film.	Anvendelsesområder Til svampeinfektioner i hudfolder og i fistler.	Anvendelsesområder Til kavitetssår og rensning.	Anvendelsesområder Til sår med lavt til moderat eksudatniveau. Semipermeabel film.	Anvendelsesområder Til sår med lavt til moderat eksudatniveau. Semipermeabel film. Fiksering med silikonekant.	Anvendelsesområder Til sår med lavt til moderat eksudatniveau.	Anvendelsesområder Til sår med moderat til højt eksudatniveau.	Anvendelsesområder Til sårbehandling med negativt tryk.
POSTOPERATIVT				✓				✓			
RENT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
KOLONISERET/ INFICERET		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NEKROTISK / TØR FIBRINØS		✓									
OVERFLADISK		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
KAVITETER		✓	✓		✓	✓					
FISTLER		✓			✓						
NPWT											✓
SVAMPEINFEKTION I HUDFOLDER			✓		✓						
		Brugsanvisning Læg bandagen med hydrogel direkte på sårområdet (ikke på den omgivende hud). Fiksér med en passende fugtbevarende bandage.	Brugsanvisning Lægges direkte på såret. Til kavitetssår: Ryst kompresset let ud og placer det direkte i såret (undgå at presse det for fast sammen). Fiksér med en passende fugtbevarende bandage. Ved svamp: Læg ét lag i direkte kontakt med det inficerede område. Fiksér på rask hud.	Brugsanvisning Fjern beskyttelsesfilmen. Læg bandagen over såret, og fjern forsigtigt den stabiliserende film ved at trække i den blå markering.	Brugsanvisning Ved svamp: Læg ét lag i direkte kontakt med det inficerede område. Fiksér på rask hud. Til fistler: Placer i fistlen med den ene ende uden for fistlen. NB: Afklippede ender skal altid forblive uden for såret.	Brugsanvisning Placer gazeviskeren i kaviteten. Fiksér med en passende fugtbevarende bandage. Følg de lokale procedurer i forbindelse med rensning.	Brugsanvisning Læg den grønne side direkte på såret. Fiksér med en passende fugtbevarende bandage.	Brugsanvisning Fjern beskyttelsesfilmen. Læg bandagen over såret. Vælg en størrelse, der gør at kanten sidder på tør hud, der ikke er fedtet. Pres forsigtigt rundt i kanterne.	Brugsanvisning Læg den grønne side direkte på såret. Fiksér med en passende fugtbevarende bandage.	Brugsanvisning Læg den grønne side direkte på såret. Fiksér med en passende fugtbevarende bandage.	Brugsanvisning Fyld hele sårkaviteten løst (undgå at presse fast sammen). Fortsæt som beskrevet for det benyttede NPWT-system.

-  Tør
-  Lavt
-  Medium
-  Højt
-  Overfladisk
-  Ikke dybt
-  Overfladisk + dybt
-  Infektionsforebyggelse
-  Sår med nekrotisk væv
-  Inficeret
-  Nekrotisk