

# Bakterier kan ikke modstå Sorbact® – det er en naturlov

Sorbact® er en opfindelse, der har vist gode resultater i sårbehandlingen. Den DACCTM-belagte overflade er af en særlig karakter og har hydrofobe egenskaber, der forebygger og behandler infektion uden at frigive aktive stoffer til såret. Bakterier er forankret og irreversibelt bundet til den unikke overflade. Sorbact® binder også svampe og endotoksiner, der kan hæmme sårheling. Baseret på fysiske interaktioner fjerner Sorbact®-bandager sikkert bakterier, svampe og endotoksiner.



**BINDER**

- Den DACCTM-belagte overflade af Sorbact® har særlige karakteristika og hydrofobe egenskaber
- Bakterier bindes og forankres naturligt til den unikke DACCTM-belagte overflade
- Binder også endotoksiner, der kan forringe sårheling\*



**HÆMMER**

- Bakterierne bindes irreversibelt og væksten hæmmes
- Det er påvist, at endotoksiner ikke bliver frigivet fra bakterierne\*
- Antimikrobiel resistens er ikke forventet



**FJERNER**

- Bundne bakterier, svampe og endotoksiner fjernes på en sikker måde
- Bakterielastningen i sårbunden mindskes
- Reduceret mikrobiel belastning fremmer den naturlige sårheling


\*In vitro-data

## Produktsortiment



### Sorbact® Compress Sårkontaktlag/Sårfyldningsmateriale

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222133	72165-34	98128	4 x 6 cm	40	ikke på aftale	72165-30	98124	10 x 100 cm	10
222125	72165-35	98125	7 x 9 cm	40				(rulle)	

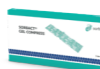

### Sorbact® Gel Compress Sårkontaktlag med hydrogel

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1999918337	72764-11	98136	7,5 x 7,5 cm	10	ikke på aftale	72764-02	98180	15 x 20 cm	5
ikke på aftale	72764-06	98139	3 x 15 cm	10	ikke på aftale	72764-04	98181	20 x 25 cm	5
ikke på aftale	72764-08	98137	7,5 x 15 cm	10					



### Sorbact® Ribbon Meche

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
ikke på aftale	72165-40	98115-10	1 x 50 cm	10	222113	72165-43	98120	5 x 200 cm	10
ikke på aftale	72165-41	98116-10	2 x 50 cm	10	1999913988	72165-39	98119	10 x 200 cm	10



### Sorbact® Foam Dressing Skumbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222136	72763-00	98310	10 x 10 cm	10	ikke på aftale	98320	98320	10 x 20 cm	10
222137	72763-01	98315	15 x 15 cm	10	1999916497	72763-06	98325-10	Ø 4,5 cm	40 (4 x 10)



### Sorbact® Surgical Dressing Filmbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222118	72766-00	98140-50	5 x 7,2 cm	50	ikke på aftale	72766-10	98144	10 x 25 cm	20
222119	72766-03	98141	8 x 10 cm	20	ikke på aftale	72766-13	98145	10 x 30 cm	20
ikke på aftale	72766-06	98142	8 x 15 cm	20	ikke på aftale	72766-15	98146	10 x 35 cm	20
ikke på aftale	72766-08	98143	10 x 20 cm	20					



### Sorbact® Superabsorbent Superabsorbant

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1000001332	72698-29	98501	10 x 10 cm	10	1000001334	72698-33	98503	20 x 20 cm	10
1000001333	72698-31	98502	10 x 20 cm	10	ikke på aftale	72698-35	98504	20 x 30 cm	10



### Sorbact® Absorption Absorptionsbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1999913969	72165-25	98226-10	7 x 9 cm	10	1999913971	72165-26	98223	10 x 20 cm	10
1999913970	72165-20	98225	10 x 10 cm	10					



### Cutimed® Siltec® Sorbact® B Skumbandage med silikonekant

Abena Varenr.*	Varenr.**	Størrelse	Stk./pk.
ikke på aftale	73251-76	7,5 x 7,5 cm	10
ikke på aftale	73251-84	10 x 10 cm	10
ikke på aftale	73251-77	12,5 x 12,5 cm	10
ikke på aftale	73251-78	15 x 15 cm	10
ikke på aftale	73251-79	17,5 x 17,5 cm	5
ikke på aftale	73251-80	22,5 x 22,5 cm	5
ikke på aftale	73251-85	7 x 10 cm (oval)	10

### Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum

Abena Varenr.*	Varenr.**	Størrelse	Stk./pk.
ikke på aftale	73251-81	17,5 x 17,5 cm	5
ikke på aftale	73251-82	23 x 23 cm	5

\*Abena varenr. til bestilling. \*\*Essity varenr.

For detaljeret produktinformation, kontraindikationer, forsigtighedsregler og advarsler, bedes den gældende brugsanvisning (IFU)

**References** 1 Mosti G et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. *J Wound Care*. 2015;24(3):121-127. 2 Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. *Wounds UK*. 2008;4:10-18. 3 Hampton S. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. *Wounds UK*. 2007;3:113-119. 4 Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. *J Wound Care*. 2022;31:560-570.

Cutimed® er et registreret varemærke tilhørende BSN medical GmbH.

Læs mere på [sorbact.dk](http://sorbact.dk)



Sorbact® er et registreret varemærke tilhørende Abigo Medical AB 9017.1223


Essity Denmark A/S Gydevang 33 DK-3450 Allerød

[sorbact.dk](http://sorbact.dk)  
+45 48 16 82 20  
[kundeservice.dk@essity.com](mailto:kundeservice.dk@essity.com)



# Brugervejledning

Sorbact® sårbandager forebygger og behandler sårinfektioner

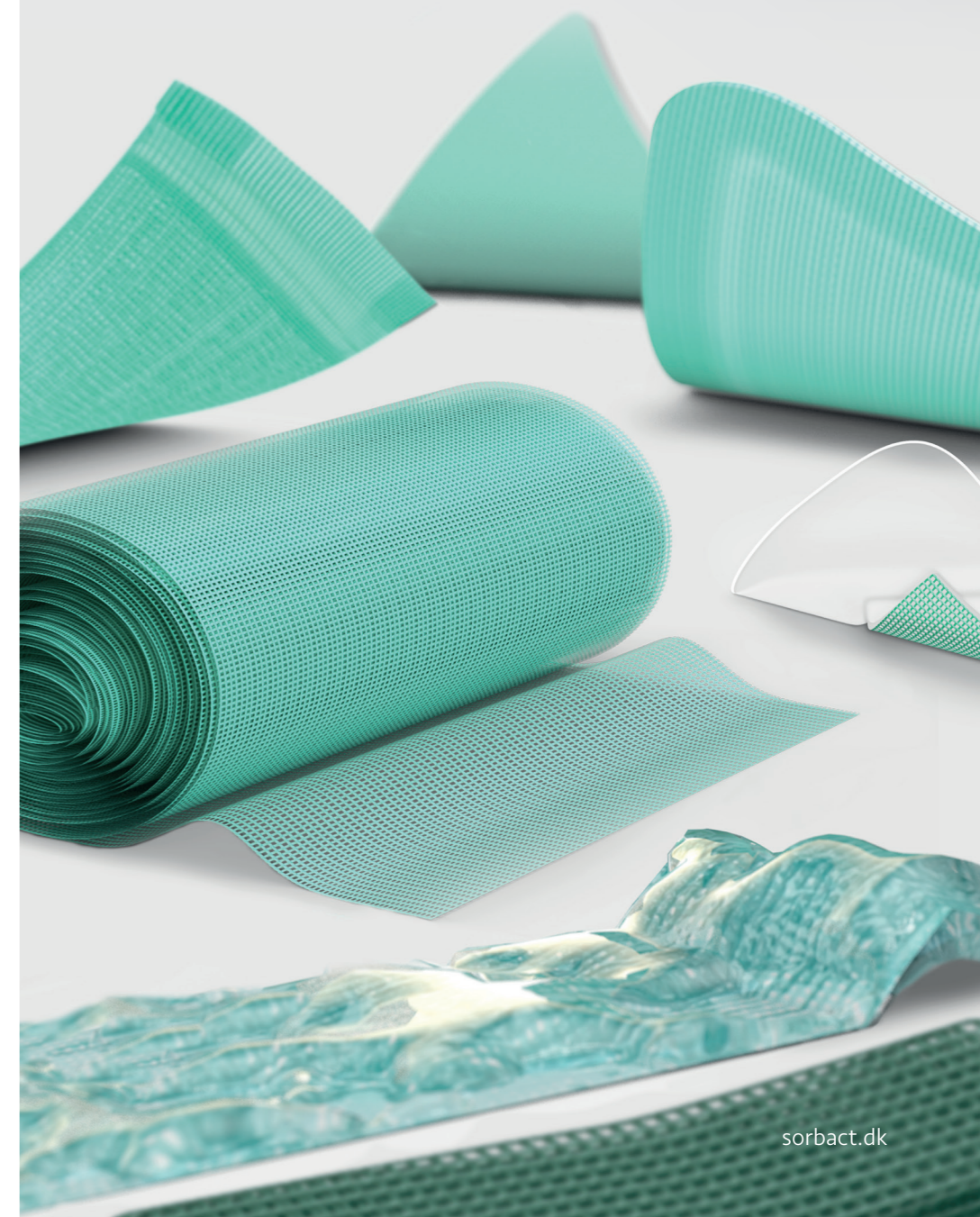

[sorbact.dk](http://sorbact.dk)

# Fordele med Sorbact®

Træf et godt valg for dine patienter

- Reducerer den mikrobielle belastning i sår<sup>1</sup>
- Sikker og nemt at bruge<sup>2</sup>
- Bidrager til at reducere smerter, mens det anvendes<sup>1</sup>
- Bidrager til at reducere lugt fra såret<sup>3</sup>
- Ingen begrænsning i behandlingstid<sup>2</sup>
- Effektiv mod multiresistente bakterier<sup>4</sup>

								
								
	<b>Anvendelsesområde</b> Væskende sår. Kan anvendes i kombination med NPWT som sårfyldningsmateriale eller sårkontaktlag.	<b>Anvendelsesområde</b> Tørre til væskende sår. Tilfører fugt til såret.	<b>Anvendelsesområde</b> Væskende sår og fistler eller ved svampeinfektion (intertrigo) i hudfolder.	<b>Anvendelsesområde</b> Moderat væskende sår. Bløde, selvklæbende silikonekanter.	<b>Anvendelsesområde</b> Lavt til moderat væskende sår.	<b>Anvendelsesområde</b> Postoperative sår og traumesår.	<b>Anvendelsesområde</b> Kraftigt til meget kraftigt væskende sår.	<b>Anvendelsesområde</b> Moderat til meget kraftigt væskende sår.
Kirurgiske snit				✓		✓		
Rent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koloniseret / Inficeret	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tørt / Fibrinøst		✓						
Overfladisk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaviteter	✓	✓	✓					
Fistler		✓	✓					
NPWT	✓							
Svampeinfektioner i hudfolder			✓					

**Sårvæske**

- Tørt
- Let
- Moderat
- Kraftigt
- Meget kraftigt

**Sårdybde**

- Overfladisk
- Dybt
- Overfladisk + Dybt

**Infektionsfase**

- Infektionsforebyggelse
- Infektionsbehandling

**Brugsanvisning**  
Sørg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret.  
**Ved dybe sår:** Udfold og ryst en eller flere bandager og fyld forsigtigt såret. Undgå at udtamponere.  
Fiksér med en sekundærbandage, der passer til mængden af sårvæske, f.eks. en skum-, absorptions- eller geldannende fiberbandage.  
**Ved NPWT-behandling:** Følg instruktionerne for anvendelse af det valgte NPWT-system.

**Brugsanvisning**  
Sørg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret. Bandagen må ikke overlape den omgivende hud. Fiksér med en fugtbevarende sekundærbandage, der passer til mængden af sårvæske, f.eks. en skum-, absorptions- eller filmbandage.

**Brugsanvisning**  
Sørg for at bandagen har direkte kontakt med hele såret eller det berørte hudområde.  
**Ved fistler:** Undgå at udtamponere.  
Lad altid en del af bandagen forblive uden for såret, så den let kan fjernes. Fiksér med en sekundærbandage, der passer til mængden af sårvæske, f.eks. en skum-, absorptions- eller geldannende fiberbandage.  
**Ved svampeinfektion:** Til fiksering kan der bruges undertøj eller hudvenlig tape (uden for det berørte område).

**Brugsanvisning**  
Bandagen skal overlape sårkanterne med 1 cm for at mindske risikoen for maceration. Fjern beskyttelsesfilmen fra sårkontaktsiden. Sørg for at bandagens grønne sårpude har direkte kontakt med hele såret. Tryk forsigtigt kanterne fast mod den omgivende hud.

**Brugsanvisning**  
Bandagen bør overlape sårkanterne med mindst 2 cm. Sørg for at bandagens grønne side har direkte kontakt med hele såret. Fiksér med velegnet bandage.

**Brugsanvisning**  
Fjern beskyttelsesfilmen fra bandagens sårkontaktside. Sørg for at bandagens grønne sårpude har direkte kontakt med hele såret. Tryk kanterne fast mod den omgivende hud og fjern den stabiliserende film.

**Brugsanvisning**  
Påfør bandagen med den grønne side af bandagen i direkte kontakt med såroverfladen. Forbindingen skal overlape sårkanterne med mindst 2 cm. Fastgør med en elastisk bandage eller hudvenlig tape.

**Brugsanvisning**  
Bandagen bør overlape sårkanterne med mindst 2 cm. Sørg for at bandagens grønne side har direkte kontakt med hele såret. Fiksér med en elastisk bandage eller hudvenlig tape.