


STØRRELSER

| Produkt                    | Varenr. | Størrelse | Str. sårpude | Stk. / æske |
|----------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|
| Sorbact® Surgical Dressing | 98140   | 5x7,2 cm  | 2,8x3,8 cm   | 100         |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98141   | 8x10 cm   | 4x5 cm       | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98142   | 8x15 cm   | 3,8x10 cm    | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98143   | 10x20 cm  | 5x15 cm      | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98144   | 10x25 cm  | 5x20 cm      | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98145   | 10x30 cm  | 5x25 cm      | 20          |
| Sorbact® Surgical Dressing | 98146   | 10x35 cm  | 5x30 cm      | 20          |

FOREBYGGER INFEKTION  
SORBACT® SURGICAL DRESSING

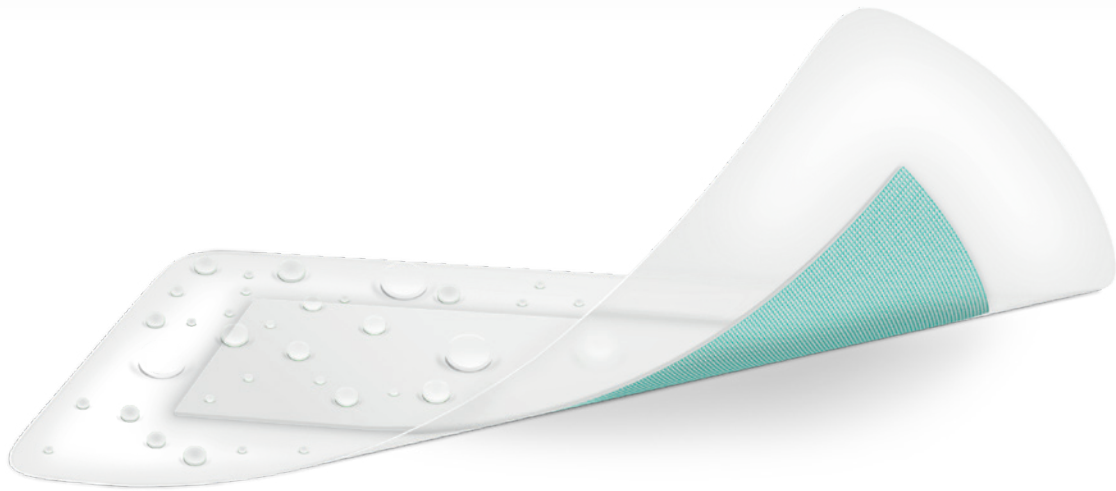

Sorbact® er et registreret varemærke tilhørende ABIGO Medical AB  
2018-28

Sorbact® er en svensk innovation og sortimentet af sårbandager sælges via ABIGO partnere og forhandlere i mere end 65 lande over hele verden. I visse regioner sælges Sorbact® som Cutimed® Sorbact® og Leukomed® Sorbact®. Find din lokale forhandler på [abigo.com](http://abigo.com). Sorbact® er et registreret varemærke, der ejes af ABIGO Medical AB.




# DEN OMKOSTNINGSEFFEKTIVE MÅDE TIL AT FORHINDRE POSTOPERATIV INFEKTION


Sårinfektion er en almindelig postoperativ komplikation og hvert år ser man 160.000-300.000 postoperative sårinfektioner i USA.<sup>1</sup> Hver sårinfektion anslås at forlænge hospitalsindlæggelsen med 7-11 dage.<sup>1</sup> Et prævalensstudie, der blev offentliggjort i 2012, viste, at postoperative sårinfektioner var de mest almindelige infektioner på hospitaler, og udgør 31% af alle infektionstilfælde blandt hospitalsindlagte patienter.<sup>2</sup>

En nyligt offentliggjort undersøgelse med 543 kvinder, der havde fået foretaget kejsersnit, enten planlagt eller akut, viste, at risikoen for postoperative infektioner blev markant reduceret med Sorbact® Surgical Dressing sammenlignet med en almindelig kirurgisk bandage.<sup>3</sup> Denne randomiserede, kontrollerede undersøgelse bekræftede, at postoperative sårinfektioner forebygges effektivt og omkostningseffektivt ved at anvende Sorbact® Surgical Dressing.

PROCENT AF POSTOPERATIV SÅRINFEKTION

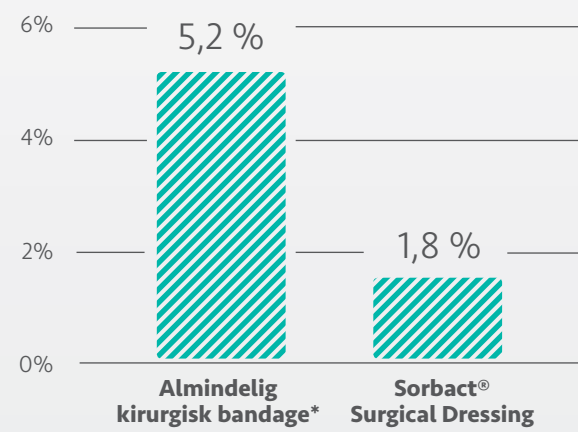

ANSLÅEDE SAMLEDE OMKOSTNINGER

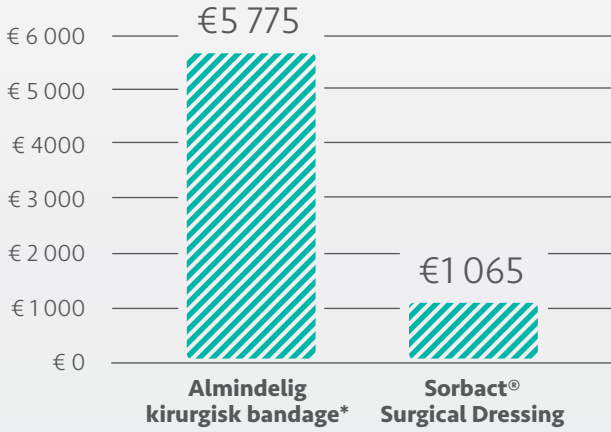

p = 0.04 | \*Tegaderm™ + Pad

|                                                          | STANDARD SURGICAL DRESSING (n=271) | SORBACT® SURGICAL DRESSING (n=272) | P-VÆRDI |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Antal patienter med SSI                                  | 14 (5.2%)                          | 5 (1.8%)                           | 0.04    |
| Antal patienter der blev genindlagt på hospital pga SSI  | 3 (1.1%)                           | 0                                  | 0.24    |
| Antal patienter der havde brug for systemisk antibiotika | 1 (1.5%)                           | 0                                  | 0.13    |

Andelen af postoperative sårinfektioner i gruppen med Sorbact® Surgical Dressing var 1,8%, hvilket var signifikant lavere sammenlignet med 5,2% i kontrolgruppen (p=0,04). De samlede omkostninger til behandling af postoperative sårinfektioner var højere i kontrolgruppen sammenlignet med gruppen med Sorbact® Surgical Dressing (hhv. 5.775 € og 1.065 €).

### REFERENCER

**1.** Anderson DJ, Podgorny K, et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2014; 35(6):605–627.


**2.** Magill SS, Hellinger W, et al. Prevalence of health-care-associated infections in acute care hospitals in Jacksonville, Florida. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2012; 33(3):283-291.

**3.** Stanirowski PJ, Bizón M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. *Hosp Infect Epidemi* 2016; [in press].

# SORBACT® SURGICAL DRESSING



Sorbact® Surgical Dressing er en steril sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag kombineret med en absorberende sårpude og en transparent, klæbende film. Sorbact® Surgical Dressing absorberer og holder på ekssudat og opretholder et fugtigt sårmiljø. Den vandafvisende film beskytter mod ekstern kontaminering og lader overskydende væske fordampe.

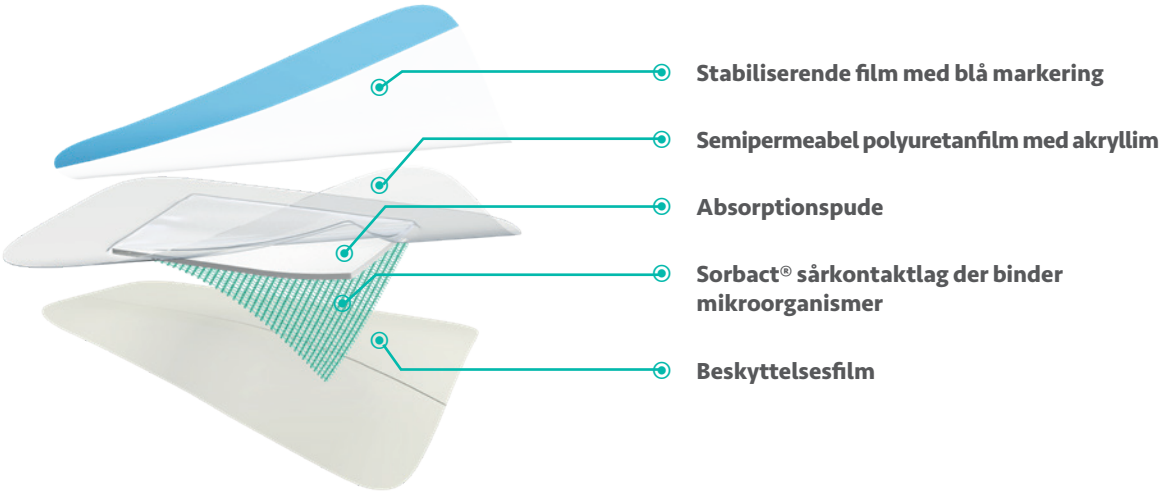

### BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis. Kontrollér, at huden omkring såret er ren og tør.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Fjern beskyttelsesfilmen fra bandagens sårkontaktside.
5. Læg bandagen på. Sørg for, at den grønne side af sårkontaktlaget er i direkte kontakt med hele såret.
6. Pres let på bandagens kanter.
7. Fjern den øverste stabiliserende film. Begynd ved den blå markør.

Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.

