


ABPM med custo screen 200 | op til 72 timers blodtryksmåling



- Kort måletid (under 30 sekunder)
- Høj patientkomfort pga. meget støjsvage målinger og blodtrykstilpasset inflationsregulering
- Nøjagtige måleresultater pga. høj kvalitet og temperaturoafhængig tryksensor
- Tydelig udlæsning med let overskuelig grafik, måletabel og sammenligningsmuligheder

- Alle målinger pr. patient kan sammenlignes og ses som tendenskurve
- Let forståelige rapporter med fortrykte tekstmoduler
- Brugervenlige A4-udskrifter med ét klik
- Papirløs medicinsk praksis: Udsendelse af målinger og rapporter som e-mail, fax, pdf og som evalueringsfil (.cst)
- Fleksible tilslutningsmuligheder til eksisterende it-strukturer (HL7, FDA-XML, SQL, GDT, SCP)

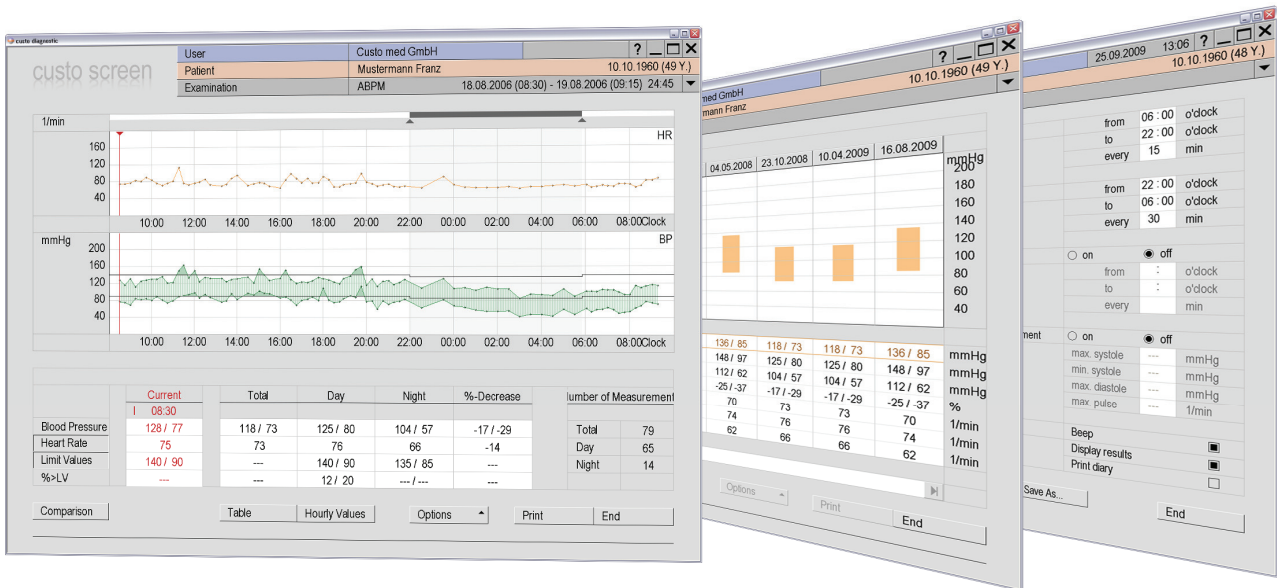

Din autoriserede forhandler af custo med



Leibnizstr. 7, 85521 Ottobrunn, Tyskland
 Tlf.: +49 (0)89 71098-00, Fax: +49 (0)89 71098-10
 E-mail: info@customed.de, Internet: www.customed.de

custo screen 200

Målemetode	Oscillometrisk måling, automatisk nulbalance
Manchettryk	Hjertefrekvens 35-220 slag i minuttet Systolisk blodtryk 70-270 mmHg Diastolisk blodtryk 40-155 mmHg max. 300 mmHg
Maks. antal målinger	512
Maksimal optagelsestid	72 timer
Varighed af en måling	< 30 sekunder
Måleintervaller	Standard: Dag: hver 15 min., nat: hver 30 min., valgfri ekstra fase, intervaller kan indstilles til mellem 5 og 90 minutter oprettelse af individuelle profiler
Manchetstørrelser	Lille (børn) 20 – 24 cm Standard (medfølger ved levering) 24 – 32 cm XL 32 – 40 cm XXL (med eller uden holder) 38 – 50 cm
Dataoverførsel	Infrarød (via custo com USB-stik)
Strømforsyning	3 stk. 1,5 V-batterier, type AA eller 3 stk. genopladelige batterier, Ni-MH, 1,2 V, min. 1500 mAh
Mål	Størrelse: ca. 100 x 66 x 26 mm (L x B x H) Vægt: ca. 180 g (uden batterier)
Klassifikation	Beskyttelsesklasse III, klasse IIa, type BF, DIN EN 60601-1

Medfølger ved levering

custo screen 200
Blodtryks-manchet
(standard)
3 batterier
Bæretaske og bælte
custo com USB-stik

Ekstraudstyr:


kombinationsmåler med
Holter EKG-modul til
samtidig måling af blodtryk
og EKG



ABPM softwarefunktioner

- ➔ Grafik over blodtryk og hjertefrekvens med enkeltværdier og timeværdier
- ➔ Patientdagbog, som kan udskrives og føres digitalt
- ➔ Hurtig identifikation af overskredne grænseværdier
- ➔ Overskueligt opstillet behandlingsoversigt med automatisk langtidsudvikling

	Ps / Pd mmHg	Pav mmHg	PP mmHg
I 26 14:00	131 / 82	98	49
I 28 14:30	135 / 97	109	38
I 30 14:47	121 / 93	102	28
I 32 15:02	154 / 102	119	52
I 33 15:15	140 / 97	111	43
I 34 15:30	127 / 96	106	31
I 39 16:00	132 / 86	101	46
	Total	Day Phase	
Period	08:30 - 09:15	05:50 - 21:59	
Blood Pressure	118 / 73	125 / 80	
Heart Rate	73	76	
Measurements	99	79	
Valid Measurements	79 (79%)	65 (82%)	

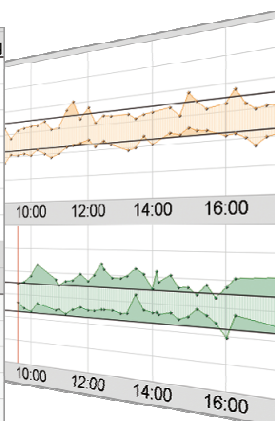

custo screen 100/200 v 2.8	
CS01A8460	
Start Parameter	06:00 - 22:00 Clock every 15 min
Measuring Intervals:	22:00 - 06:00 Clock every 30 min
Repeating Measurements:	max. Systole --- mmHg
	max. Diastole --- mmHg
	max. HR --- 1/min
Alerts:	Display on
	Signal on