

Cutimed® Siltec®

Closing wounds. Together.

Håndtering af
ekssudat
kræver den
bedste støtte

Perfekt
balance til
forskellige
mængder

Med
Cutimed Siltec



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSNmedical


an SCA company

CUTIMED®

SKÆDDERSYDEDE LØSNINGER TIL DEN ENKELTE PATIENT

Der er mange forhold, der skal tages i betragtning ved sårheling, og effektiv væskehåndtering er en afgørende faktor.

Væskeniveauet varierer i løbet af sårhelingsprocessen, og for at opnå det bedste resultat er det derfor vigtigt at anvende en forbinding, som er tilpasset til sårets væskeniveau.

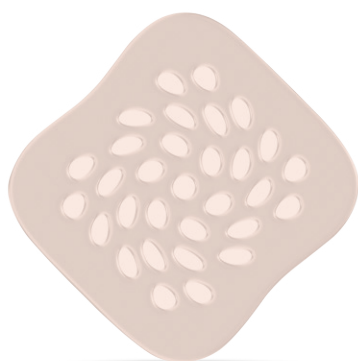

Cutimed® HydroControl®
Hydropolymerforbinding



Cutimed® Siltec® Forbinding
af polyuretanskum



Cutimed® Sorbion®
Superabsorberende forbinding

HÅNDTERING AF SÅRVÆSKE

LAV MÆNGDE

HØJ MÆNGDE



CUTIMED® SILTEC®

PERFEKT SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE KOMPONENTER

Den velafvejede kombination af forskellige materialer gør Cutimed® Siltec® til en polyuretanskumforbinding med høj sugeevne, som du kan stole på.

Forbindingen er udformet til at give en fremragende væskehåndtering, og det innovative design tilbyder patienterne nogle klare fordele, som giver dem øget livskvalitet og får dem til at overholde behandlingen.



Effektiv håndtering af sårveske takket være den lodrette absorption af forskellige typer og mængder af sårveske.



Pålidelig vedhæftning takket være den fuldt dækkende silikonebelægning.



Anatomisk form, der tilpasser sig til kroppens konturer og giver den bedste komfort.

INDIKATIONER*

Cutimed® Siltec® er udformet til at tilpasse sig til sår med en lav, moderat eller høj mængde sårveske med varierende viskositetsgrad, herunder meget høj viskositet.



Venøse eller arterielle
bensår



Tryksår



Fodsår hos en
diabetiker



Hudtransplantat



Donorsted til
hudtransplantation

* Du kan læse om yderligere indikationer i brugsanvisningen.

POLYURETANFILM

HØJ ÅNDBARHED




Cutimed® Siltec® giver pålidelige resultater uafhængigt af mængden af sårveske eller graden af viskositet. Polyuretanfilmen tilpasser sig til fordampningen i takt med mætningsgraden. Dermed beskyttes sårbunden mod overskydende fugt, og der skabes et optimalt helingsmiljø, også når væskenniveauet ændres, eller hvis væsken er meget viskøs.

Forbindingen sikrer en relevant fordampning uafhængigt af forbindens mætningsgrad.

- Tilpasser MVTR*, efterhånden som væskemængden skifter
- Forhindrer lækage
- Mætningsgraden kan nemt ses
- Unødvendige forbindelsesskift undgås
- Tåler brusebad¹ og er vandafvisende^{1,2}


¹ Cutimed® Siltec® med hæftekant

² Cutimed® Siltec® uden hæftekant

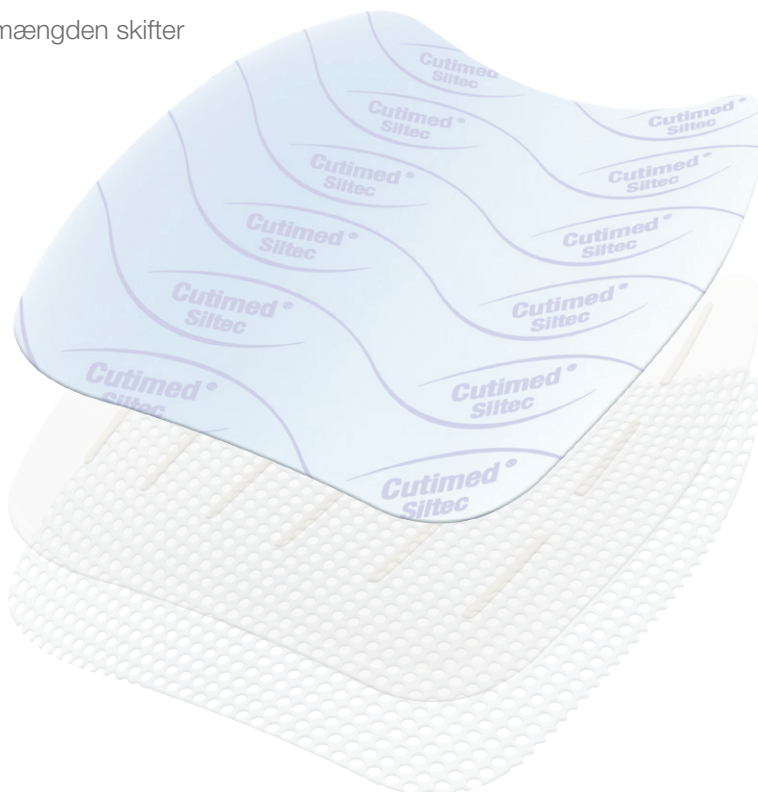

Høj mængde sårveske

Lav til moderat mængde sårveske


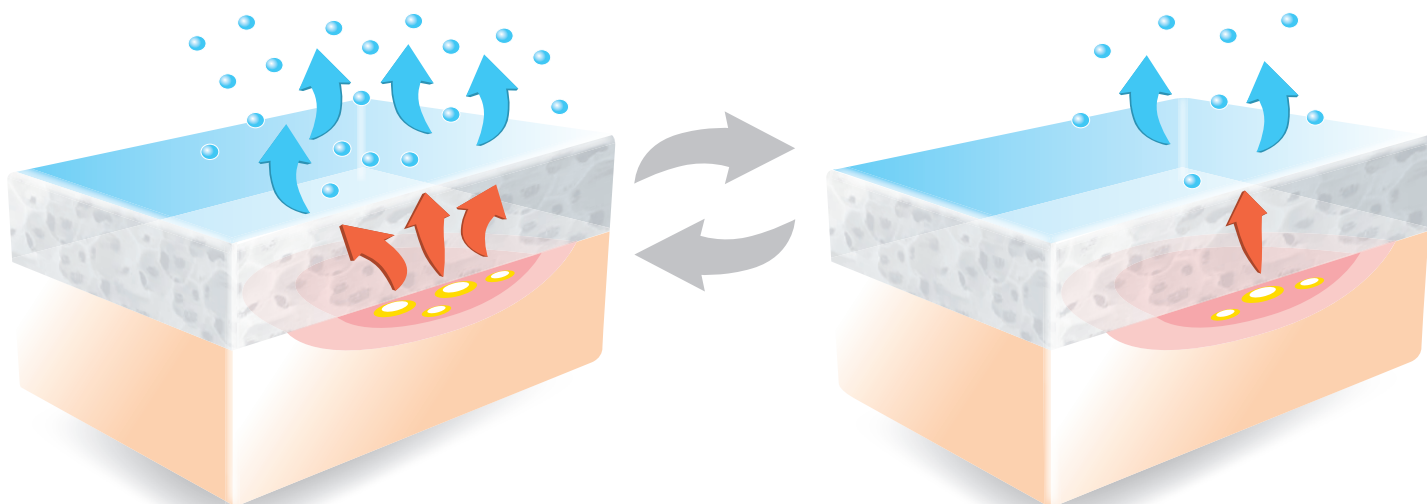


SUPERABSORBENTER

ABSORBERER OG BINDER SÅRVÆSKEN


Takket være teknologien med superabsorbenter bindes sårvæsken på en sikker måde, også under kompression, hvilket mindsker risikoen for lækage og maceration.

- Pålidelig absorption ved små, moderate og store mængder sårvæske.
- Binder sårvæsken effektivt, også under kompression
- Tilpasser sig til skiftende væskemængder
- Superabsorbenterne er smeltet sammen med polyuretanskummet, hvilket betyder, at forbindingen kan klippes til
- Færre forbindingsskift

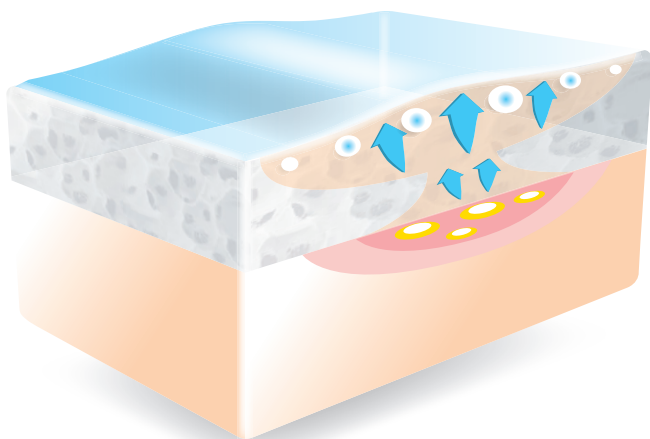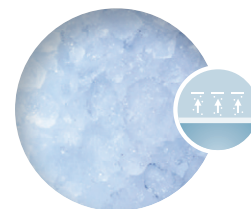


INTELLIGENT SKUM

TRÆKKER HURTIGT VÆSKEN OP TIL SKUMKERNENS ØVERSTE DEL

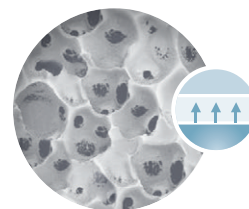

Skumstrukturen i Cutimed® Siltec® sikrer en effektiv, lodret absorption, uden at såret tørrer ud, hvilket resulterer i en sikker behandling. Forbindingen har en rigtig god evne til at absorbere meget viskøs sårveske. Det skyldes det perforerede silikonelag og skumkernens store porer.


- Sikrer effektiv, lodret absorption og beskytter huden mod maceration
- Absorberer væske med lav til meget høj viskositet

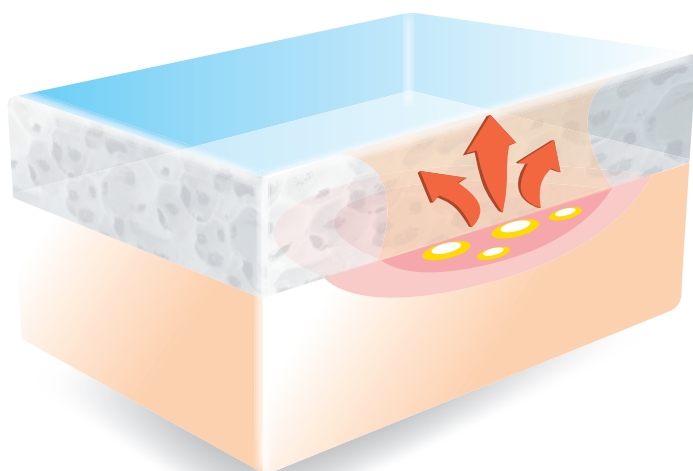

Cutimed® Siltec® med lodret absorption



PERFORERET SÅRKONTAKTLAG AF SILIKONE

SKÅNSOM VEDHÆFTNING

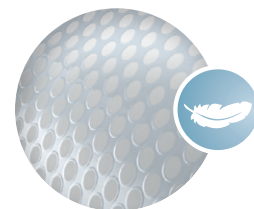


Det perforerede, vedhæftende silikonelag tillader væskeoverførsel, samtidig med at det fungerer som en effektiv barriere, der gør, at vævet ikke gror fast til skumkernen. Dermed beskyttes det nydannede, epiteliserede væv.

- Sår væsken passerer nemt igennem, uafhængigt af viskositetsgraden
- Skånsom vedhæftning
- Atraumatiske og mindre smertefulde forbindelsesskift for patienten

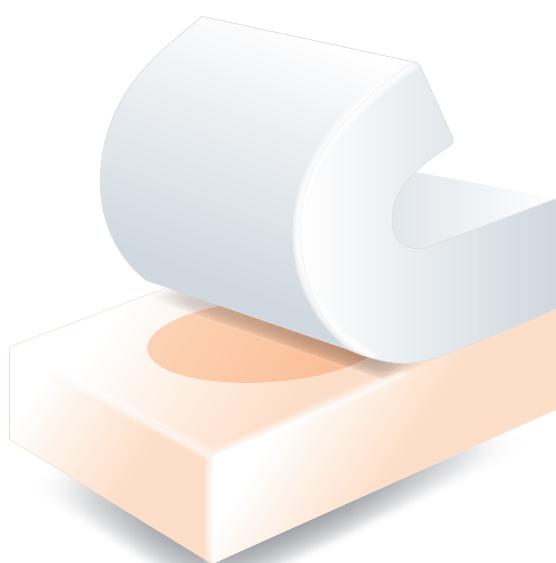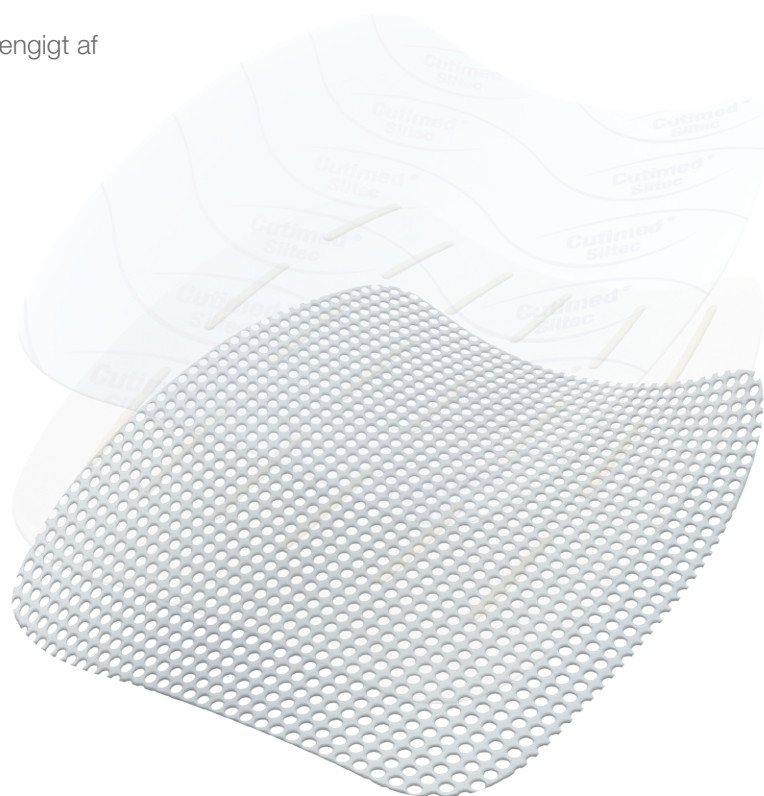

Silikonevedhæftning

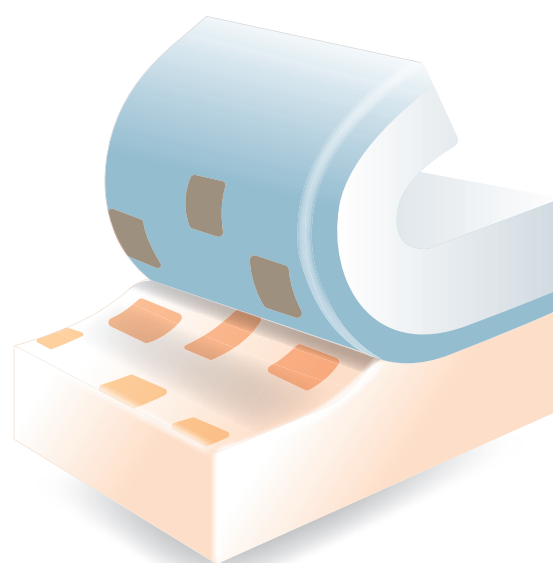

Akrylvedhæftning

PERFEKT SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE KOMPONENTER



ÅNDBAR BESKYTTESESFILM

- Dynamisk håndtering af ekssudat, perfekt kombination af absorption og vaporisering
- Barrier mod bakterier





ANATOMISK DESIGN

- Tilpasser sig perfekt til kroppens konturer




KAN KLIPPES TIL

- Kan tilpasses alle ønskede behov

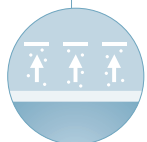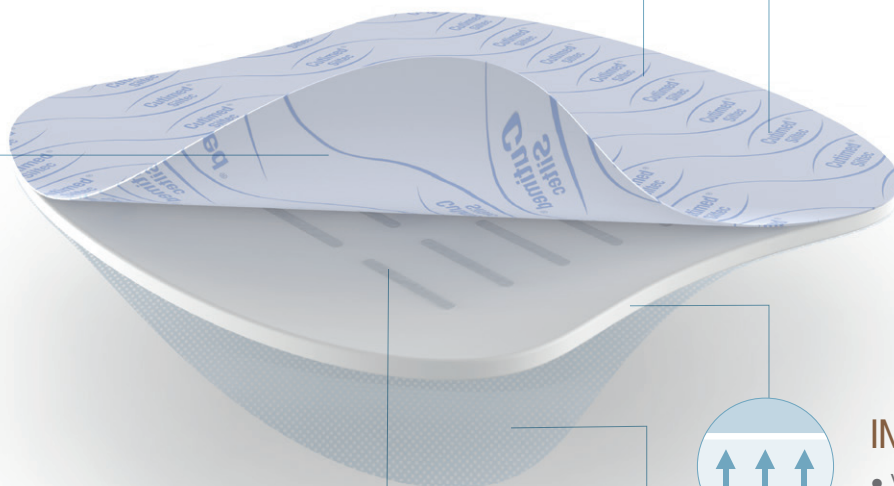

TEKNOLOGI MED SAMMENSMELTEDE SUPERABSORBANTER

- Binder sår væsken gennem ekstra absorption og er i stand til at fastholde væsken

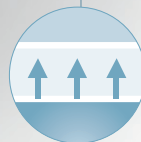

INTELLIGENT SKUM

- Vertikal absorption af ekssudatet mindsker risikoen for hudmaceration
- Høj absorption af forskellige typer ekssudat



SKÅNSOM VEDHÆFTNING

- Atraumatisk og mindre smertefuld bandageskift takket være silikonebelægningen
- Skumbandagen kan omplaceres

FLEKSIBEL PÅFØRING

ANATOMISK TILPASSEDE FORMER

Forbindingen skal passe til de særlige, uregelmæssige sårformer, følge kroppens konturer og tillade en vis grad af kropsbevægelse. Samtidig skal forbindingen være i tæt kontakt med sårbunden for at skabe et optimalt helingsmiljø.

Den bløde og smidige formbarhed sikrer, at forbindingen tilpasser sig til forskellige kropskonturer. Den anatomiske form og de afrundede hjørner gør, at forbindingen sidder godt, uanset hvor den påføres.



CUTIMED® SILTEC®

FORSKELLIGE SÅR KRÆVER FORSKELLIGE LØSNINGER



CUTIMED® SILTEC®

DEN BLIDE

Superabsorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning.

- Ideel til sart hud, f.eks. kortison belastet hud eller pergamenthud



CUTIMED® SILTEC® PLUS

HJÆLPEREN

Superabsorberende silikone skumbandage med forstærket klæb, om sikrer en bedre vedhæftning.

- Pålidelig vedhæftning sikrer nem applicering
- Særligt velegnet til svært tilgængelige sår



CUTIMED® SILTEC® L

DEN LETTE

Tynd, absorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning.

- Velegnet til sår med lav til moderat ekssudatmængde på svært tilgængelige steder på kroppen, f.eks. mellem tærne eller i hudfolder under brystet eller i lyske-regionen



CUTIMED® SILTEC® B

DET SIKRE VALG

Superabsorberende silikone skumbandage med silikone klæbekant.

- Pålidelig og veltolereret vedhæftning
- Kan nemt omplaceres samt atraumatisk ved brug
- Kan anvendes under bruseren



SPECIALFORMER



CUTIMED® SILTEC® B OVAL

Superabsorberende oval silikone skumbandage med silikone klæbekant.

- Pålidelig og veltolereret vedhæftning
- Den ovale form tilpasser sig perfekt til kroppens konturer
- Kan anvendes under bruseren



CUTIMED® SILTEC® PLUS HEEL 2D

Superabsorberende silikone skumbandage til hælen med forstærket klæb, som sikrer en bedre vedhæftning.

- Pålidelig vedhæftning sikrer nem applicering
- Særligt velegnet til svært tilgængelige sår
- Det ekstra tykke skum (7 mm) polstrer såret og virker trykafastende



CUTIMED® SILTEC® HEEL 3D

Superabsorberende silikone skumbandage med blid vedhæftning, som passer til hælen.

- Anatomisk formet til hurtig og nem påsætning
- Det ekstra tykke skum (7 mm) polstrer såret og virker trykafastende



CUTIMED® SILTEC® SACRUM

Superabsorberende silikone skumbandage med silikone klæbekant, som passer til området omkring sacrum.

- Anatomisk formet bandage med ekstra bred silikone klæbekant
- Polstrer såret og virker trykafastende
- Kan anvendes under bruseren



CUTIMED® SILTEC®

BESTILLINGSOVERSIGT

		Sårpude størrelse	Størrelse	Varenr.	Antal	PZN	
Cutimed® Siltec® Superabsorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning 			5 x 6 cm	73285-00	10	100	
			10 x 10 cm	73285-01	10	100	
			10 x 20 cm	73285-02	10	100	
			15 x 15 cm	73285-03	10	100	
			20 x 20 cm	73285-04	5	50	
Cutimed® Siltec® Plus Superabsorberende silikone skumbandage med SoftTack teknologi, som giver en forstærket vedhæftning 			5 x 6 cm	73288-00	10	100	
			10 x 10 cm	73288-01	10	100	
			10 x 20 cm	73288-02	10	100	
			15 x 15 cm	73288-03	10	100	
			20 x 20 cm	73288-04	5	50	
Cutimed® Siltec® L (Light) Tynd, absorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning 			5 x 6 cm	73283-00	10	100	
			10 x 10 cm	73283-01	10	100	
			15 x 15 cm	73283-02	10	100	
Cutimed® Siltec® B (Border) Superabsorberende silikone skumbandage med silikone klæbekant 			4 x 4 cm	7,5 x 7,5 cm	73284-00	10	100
			6 x 6 cm	10 x 10 cm	73284-05	10	100
			5 x 16,5 cm	10 x 22,5 cm	73284-06	10	100
			8,2 x 8,2 cm	12,5 x 12,5 cm	73284-01	10	100
			10 x 10 cm	15 x 15 cm	73284-02	10	100
			12,3 x 12,3 cm	17,5 x 17,5 cm	73284-03	5	50
			16,5 x 16,5 cm	22,5 x 22,5 cm	73284-04	5	50
Specialformer							
Cutimed® Siltec® B Oval Superabsorberende, oval silikone skumbandage med silikoneklæbekant 		6,0 x 3,0 cm	10 x 7 cm	73284-14	12	12	
Cutimed® Siltec® Plus Heel 2D Superabsorberende silikone skumbandage med Soft-Tack teknologi, som giver en forstærket vedhæftning 			16 x 24 cm	73288-05	5	50	
Cutimed® Siltec® Heel 3D Superabsorberende silikone skumbandage med blid vedhæftning, som passer til hælen 			16 x 24 cm	73286-01	5	50	
Cutimed® Siltec® Sacrum Superabsorberende silikone skumbandage med silikonekant, som passer til området omkring sacrum 		11,6 x 9,7 cm	17,5 x 17,5 cm	73287-00	5	50	
		16,6 x 14 cm	23 x 23 cm	73287-01	5	50	

Cutimed® Siltec®
er velegnet til::

Sårfase
 Fibrinbelægning
 Granulation
 Epitelisering

Eksudatmængde
 Lav til moderat
 Moderat til høj

Sår dybde
 Overfladisk

Du kan finde komplette anvisninger i sikker brug
af disse produkter på indlægssedlen.

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · SE-427 40 Billdal
Tlf: 33 36 35 34 · Fax: 33 36 35 31

kundeservice.dk@bsnmedical.com
www.bsnmedical.dk

BSNmedical

an SCA company